

# Cortrium Apex 1.27

# Cortrium Apex 1.27

## Gebruiksaanwijzing

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Beoogd gebruik en waarschuwingen .....                                      | 3  |
| 2. Installatie .....                                                           | 5  |
| 3. Inloggen bij Cortrium Apex .....                                            | 6  |
| 3.1 Gebruikers aangemeld houden op lokale computer in Cortrium Apex.....       | 8  |
| 4. De C3w/C3+ voorbereiden op een nieuwe patiënt.....                          | 9  |
| 5. Een Holter-rapport bestellen.....                                           | 12 |
| 6. Holter-rapporten en de hele opname bekijken .....                           | 16 |
| 6.1 Holter-rapporten bekijken .....                                            | 16 |
| 6.2 Opnameviewer .....                                                         | 18 |
| 6.3 Samenvatting bewerken .....                                                | 19 |
| 7. Patiëntgegevens bewerken en details van opnames bekijken .....              | 19 |
| 8. Een opname verwijderen .....                                                | 22 |
| 9. EDF-bestand downloaden .....                                                | 24 |
| 9.1 Het EDF-bestand downloaden voor het bestellen van een Holter-rapport ..... | 24 |
| 9.2 Het EDF-bestand downloaden na het bestellen van een Holter-rapport .....   | 26 |
| 10. Uitloggen bij Cortrium Apex.....                                           | 27 |
| 11. Software-updates.....                                                      | 27 |
| 12. Minimale technische vereisten .....                                        | 27 |
| 13. Problemen oplossen .....                                                   | 28 |
| 13.1 "Het apparaat lijkt te zijn ingesteld voor een patiënt..." .....          | 28 |

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| 13.2 Opnameoverzicht toont "n/a lead off" of "n/a events" ..... | 28 |
| 13.3 De internetverbinding is onderbroken. ....                 | 28 |
| 13.4 Apex is net geïnstalleerd maar opent niet .....            | 29 |
| 14. Beveiligingsinformatie .....                                | 29 |
| 15. Etikettering en symbolen .....                              | 30 |
| 16. Infrastructuurverklaring .....                              | 31 |
| Bijlage I .....                                                 | 32 |
| i. Beschikbare integraties .....                                | 32 |
| ii. GDT patiëntendossier .....                                  | 33 |
| iii. DICOM ingekapseld rapport .....                            | 34 |
| iv. Opzoeken van reanimatiepatiënten .....                      | 36 |
| v. Rol voor alleen uploaden .....                               | 37 |
| vi. Active Directory-integratie .....                           | 38 |
| vii. Verwijzing van patiënten .....                             | 39 |
| viii. Goedkeuringsstroom voor rapporten .....                   | 42 |
| ix. Nereida-patiëntopzoeking en -rapportage .....               | 45 |

## 1. Beoogd gebruik en waarschuwingen

## Beoogd gebruik

Cortrium Apex is een software-applicatie die wordt gebruikt om de Cortrium C3w/C3+-holtermonitor voor te bereiden voor gebruik bij een nieuwe patiënt, patiëntgegevens te beheren, ECG-Holter-rapporten te bestellen en te bekijken, de opname te downloaden in .EDF-formaat en de volledige ECG-opname te bekijken. Bovendien kunnen opnamegegevens worden gedownload en geïmporteerd in software van derden voor analyse. De software is compatibel met zowel Microsoft Windows als MacOS (zie hoofdstuk 12 voor de minimumvereisten).

## Beoogde gebruikers

De software is bedoeld voor gebruik door gezondheidswerkers in privépraktijken, klinieken en ziekenhuizen, maar ook op afstand.

## Waarschuwingen

- Dit product mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met het beoogde gebruik zoals vermeld in deze gebruiksaanwijzing
- Gebruikers van dit product zijn uniek en mogen nooit wachtwoorden delen
- Screenshots van de software kunnen gevoelige informatie bevatten en moeten worden vermeden
- Als er gegevens buiten het systeem worden gedeeld, is dit op eigen risico van de gebruiker
- Neem in geval van ernstige incidenten met betrekking tot de software direct contact op met uw plaatselijke bevoegde autoriteit en met Cortrium via e-mail: [customercare@cortrium.com](mailto:customercare@cortrium.com).

## Aanvullende informatie

Houd er rekening mee dat de softwareversie die in de schermafbeeldingen in deze handleiding wordt weergegeven, kan verwijzen naar eerdere versies van de software.

Als er bijvoorbeeld geen wijzigingen zijn aangebracht in de gebruikersinterface, kan de versie op de schermafbeeldingen ouder zijn dan de huidige versie van de software, maar de functionaliteit is identiek.

Voor gebruikers die integraties hebben ingeschakeld, kunnen schermafbeeldingen en gebruik verschillen. Raadpleeg Bijlage I aan het einde van dit document voor instructies over het gebruik van deze integraties.

### **Contra-indicaties**

Apex mag niet worden gebruikt voor de voorbereiding van patiënten met levensbedreigende aandoeningen die onmiddellijk gevaar kunnen opleveren.

## **2. Installatie**

- a. U bent per e-mail uitgenodigd voor Cortrium Apex. Open de uitnodigingsmail op de computer waarop u Cortrium Apex wilt installeren
- b. Klik op de link in de uitnodigingsmail om een wachtwoord in te stellen
- c. Bevestig uw wachtwoord
- d. Selecteer "Ga naar volgende stap" om door te gaan met downloaden
- e. Download het installatiebestand voor Windows of MacOS
- f. Wanneer het downloaden is voltooid, voert u het installatiebestand uit
- g. Als de installatie voltooid is, opent Cortrium Apex automatisch
- h. U kunt nu inloggen met uw e-mailadres en het bijbehorende wachtwoord en Cortrium Apex gaan gebruiken


Voor Cortrium Apex is een internetverbinding nodig. Zonder internetverbinding kunt u niet inloggen of gebruik maken van Cortrium Apex

### 3. Inloggen bij Cortrium Apex


Om Cortrium Apex te gebruiken, moet u eerst een gebruikerslogin hebben. Als u de beheerder van de faciliteit bent, is dit voor u ingesteld door Cortrium. Als u geen beheerder bent en nog geen gebruikerslogin hebt, kan deze worden ingesteld door de beheerder van uw faciliteit.

Zodra u Cortrium Apex heeft geïnstalleerd en uw login heeft ontvangen, kunt u doorgaan met de volgende stappen:

- Open Cortrium Apex op uw computer door te dubbelklikken op het Cortrium Apex-pictogram.
- Klik op "Aanmelden" (Als u uw wachtwoord bent vergeten, klik dan op "Wachtwoord vergeten")

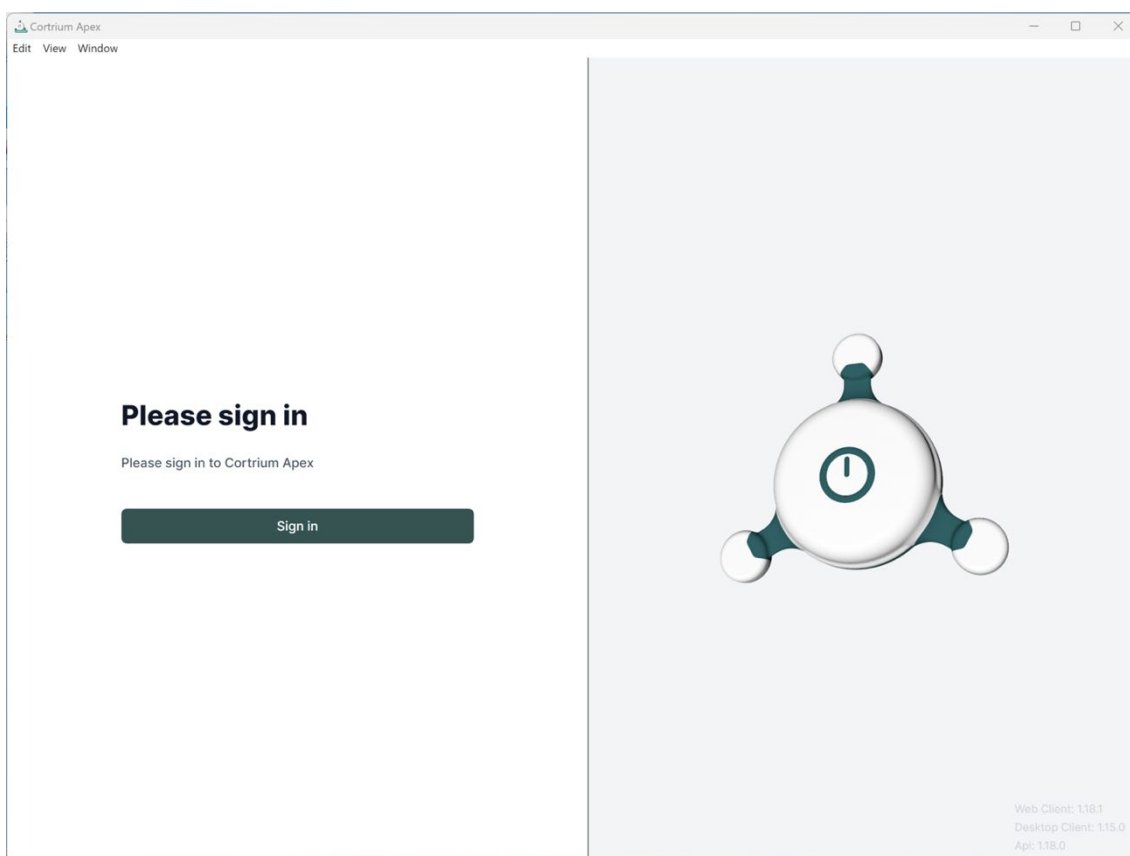


- Voer uw gebruikersinformatie in en druk op "Doorgaan".

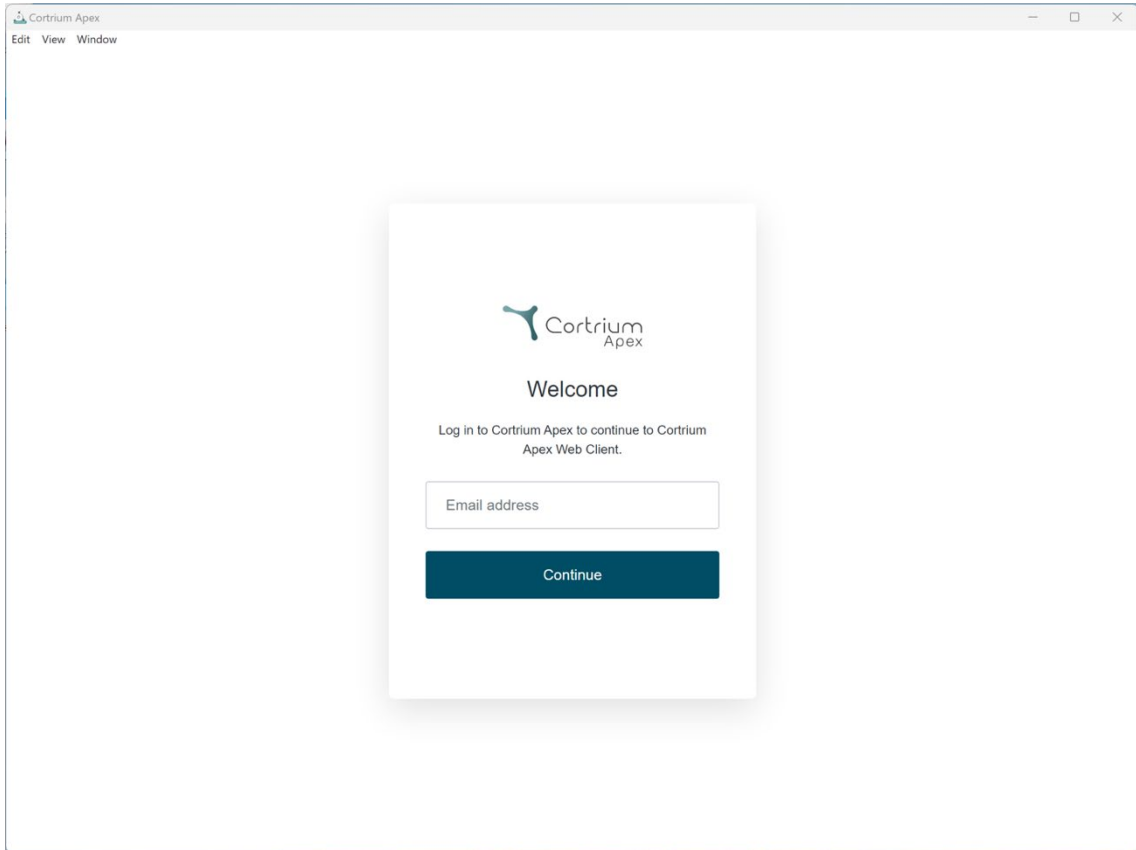

The screenshot shows a web browser window titled "Cortrium Apex" with a menu bar containing "Edit", "View", and "Window". In the center of the browser is a white login dialog box with a subtle shadow. The dialog box features the Cortrium Apex logo at the top, followed by the heading "Welcome". Below the heading is the instruction "Log in to Cortrium Apex to continue to Cortrium Apex Web Client." There is a text input field labeled "Email address" and a dark blue button labeled "Continue" at the bottom of the dialog.

### 3.1 Gebruikers aangemeld houden op lokale computer in Cortrium Apex

- Gebruikers kunnen lokaal aangemeld blijven als OS beveiliging is ingeschakeld.

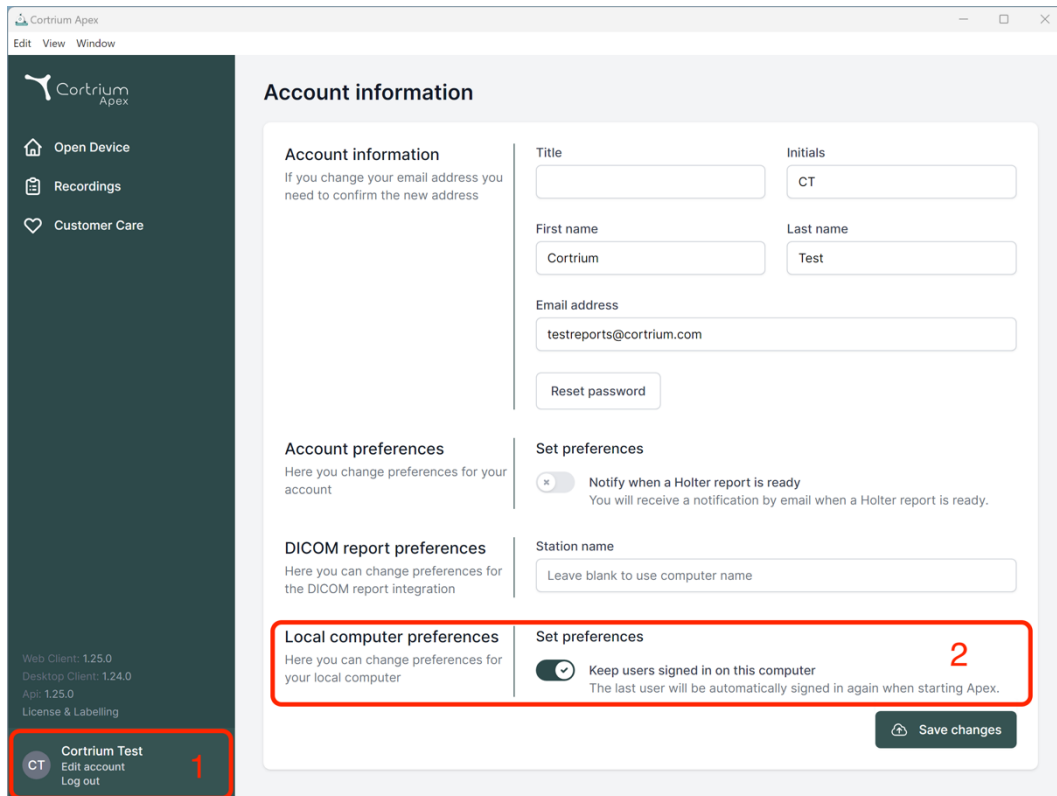

**Account information**

If you change your email address you need to confirm the new address

Title:

Initials:

First name:

Last name:

Email address:

[Reset password](#)

**Account preferences**

Here you change preferences for your account

**DICOM report preferences**

Here you can change preferences for the DICOM report integration

**Local computer preferences**

Here you can change preferences for your local computer

**Set preferences**

☒ **Notify when a Holter report is ready**  
You will receive a notification by email when a Holter report is ready.

**Station name**

**Local computer preferences**

☒ **Keep users signed in on this computer**  
The last user will be automatically signed in again when starting Apex.

[Save changes](#)


**CT Cortrium Test**  
Edit account  
Log out




## 4. De C3w/C3<sup>+</sup> voorbereiden op een nieuwe patiënt

Als de C3w/C3<sup>+</sup> al is gebruikt om een langdurig ECG op te nemen, lees dan de paragraaf "Een Holter-rapport bestellen" voordat u de stappen in deze paragraaf volgt.


- Selecteer de knop "Apparaat openen".

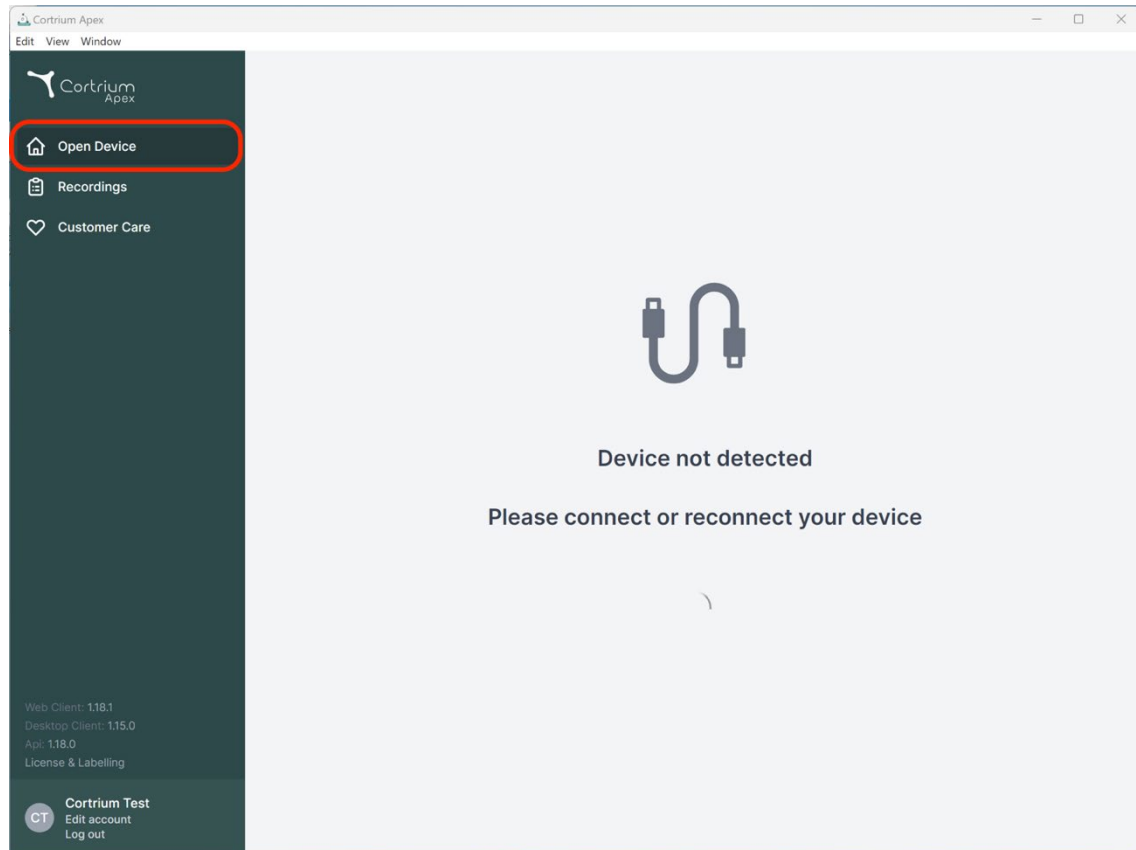

- Sluit de C3w/C3<sup>+</sup> aan op de computer met de meegeleverde USB-kabel.  
(Als u een Apple-product gebruikt, hebt u mogelijk een USB-converter nodig)

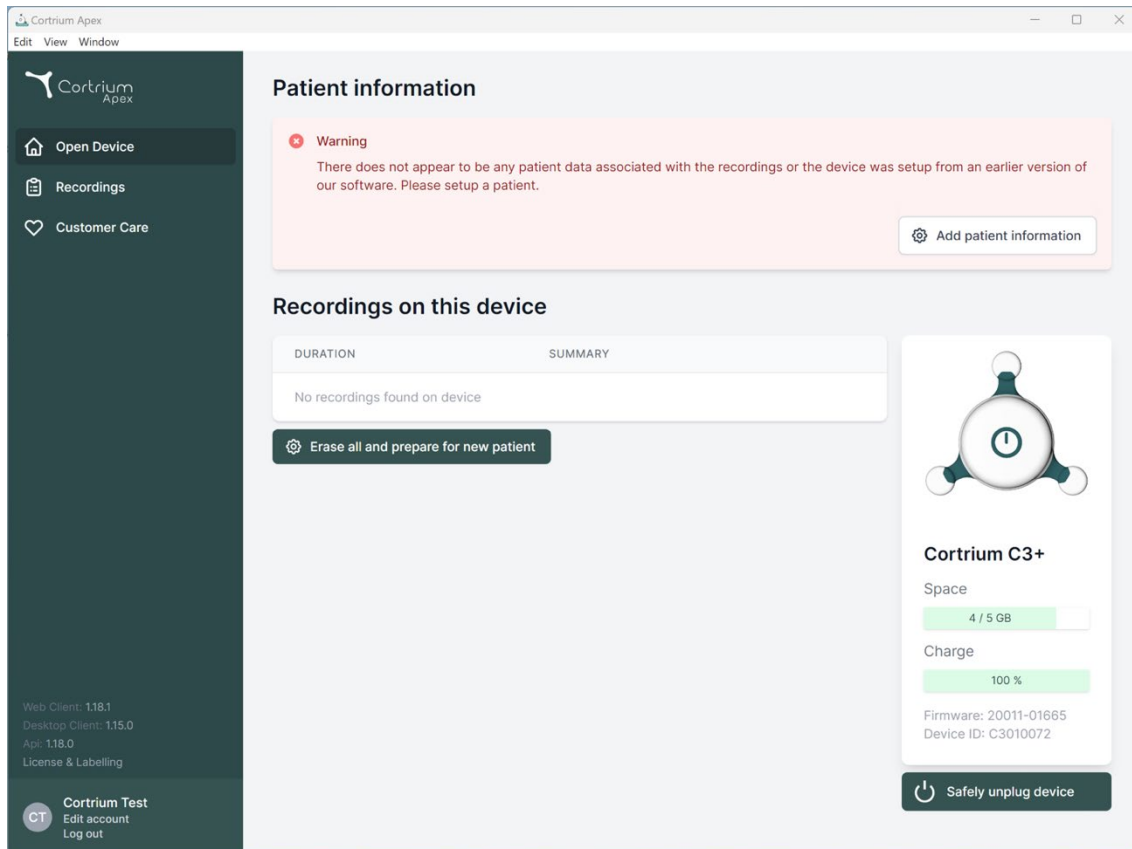

- Cortrium Apex toont informatie over het aangesloten apparaat en alle gegevens die erop zijn opgeslagen.
- Selecteer “Alles wissen en apparaat voorbereiden voor nieuwe patiënt”.
- Vul de relevante patiënt- en opnamegegevens in:

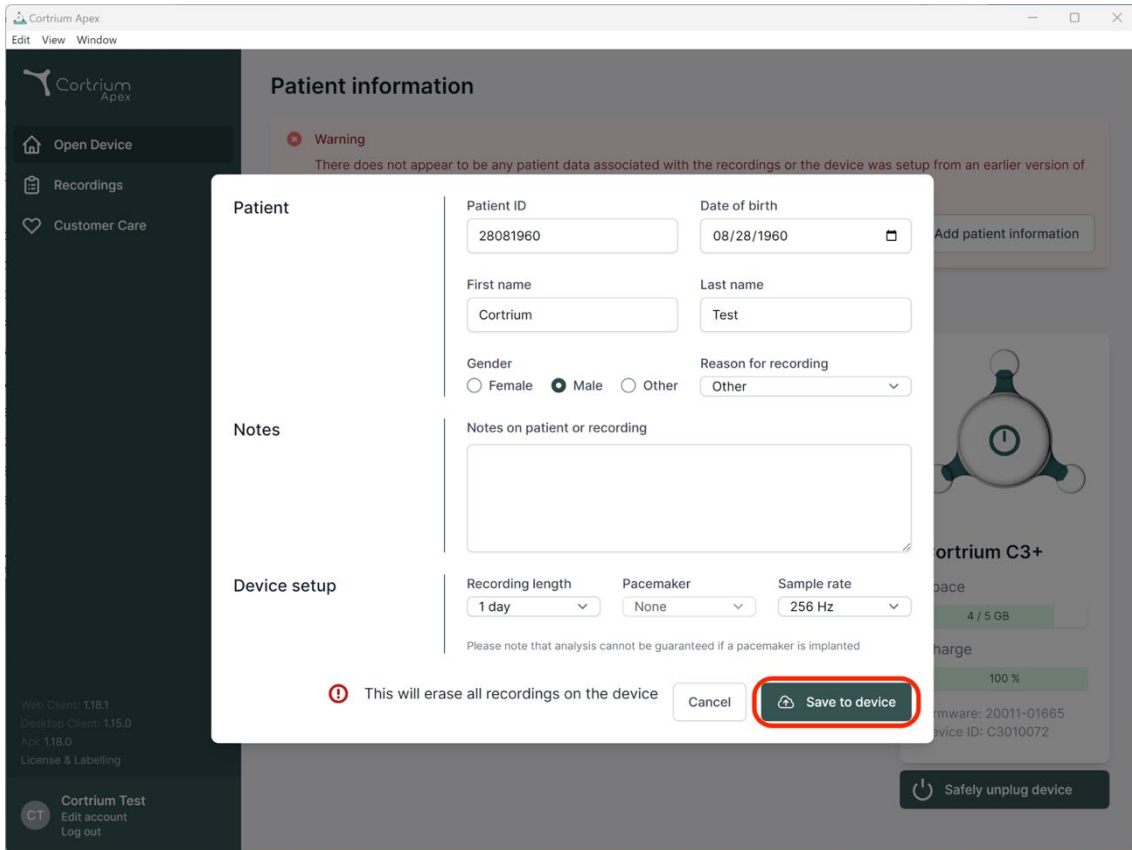

**Patient information**

**Warning**  
There does not appear to be any patient data associated with the recordings or the device was setup from an earlier version of

**Patient**

Patient ID: 28081960 Date of birth: 08/28/1960

First name: Cortrium Last name: Test

Gender: ☐ Female ☒ Male ☐ Other Reason for recording: Other

**Notes**

Notes on patient or recording

**Device setup**

Recording length: 1 day Pacemaker: None Sample rate: 256 Hz

Please note that analysis cannot be guaranteed if a pacemaker is implanted


**Save to device**

- Klik nu op "Opslaan op apparaat". Hierdoor worden alle op het apparaat opgeslagen patiëntgegevens of opnamen gewist en wordt de nieuwe patiëntinformatie in het systeem opgeslagen.
- U kunt uw apparaat nu uitwerpen via de knop "Apparaat veilig loskoppelen" aan de rechterkant.
- De C3w/C3<sup>+</sup> is nu klaar voor een opname van een nieuwe patiënt.
- Als u verkeerde patiëntgegevens hebt ingevoerd, kunnen deze worden bewerkt door te klikken op "Patiëntgegevens bewerken".


## 5. Een Holter-rapport bestellen

Met Cortrium Apex kunt u opnames versturen voor analyse en het Holter-rapport downloaden zodra het beschikbaar is. Wanneer een apparaat met een opname wordt teruggestuurd, klik dan op de knop "Apparaat openen" en selecteert u de volgende stappen met de knop "Acties". Standaard heeft u de volgende twee opties:

- Holter-rapport bestellen
- Uploaden en exporteren als EDF

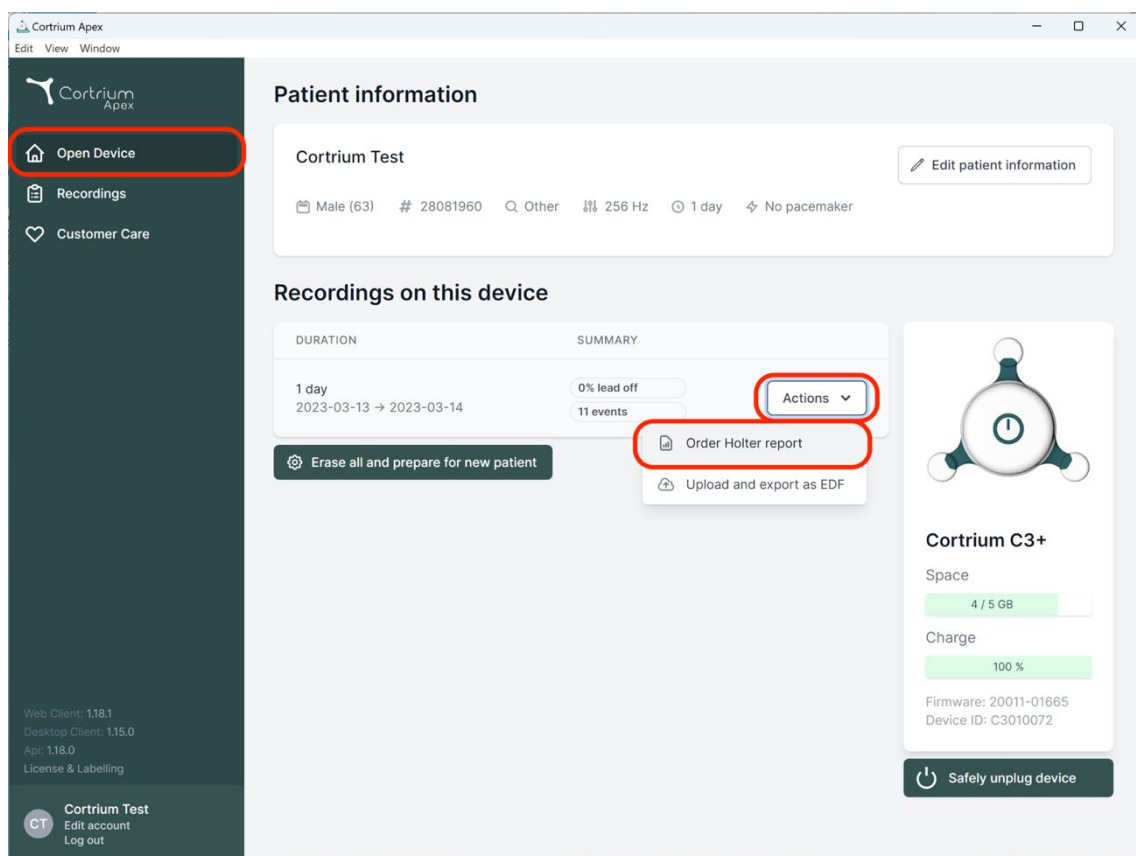

Om het Holter-rapport te bestellen, klikt u op de knop "Acties" en vervolgens op "Holter-rapport bestellen". Er verschijnt een formulier waarmee u uw bestelling kunt bevestigen of extra opties voor uw analyse kunt kiezen.

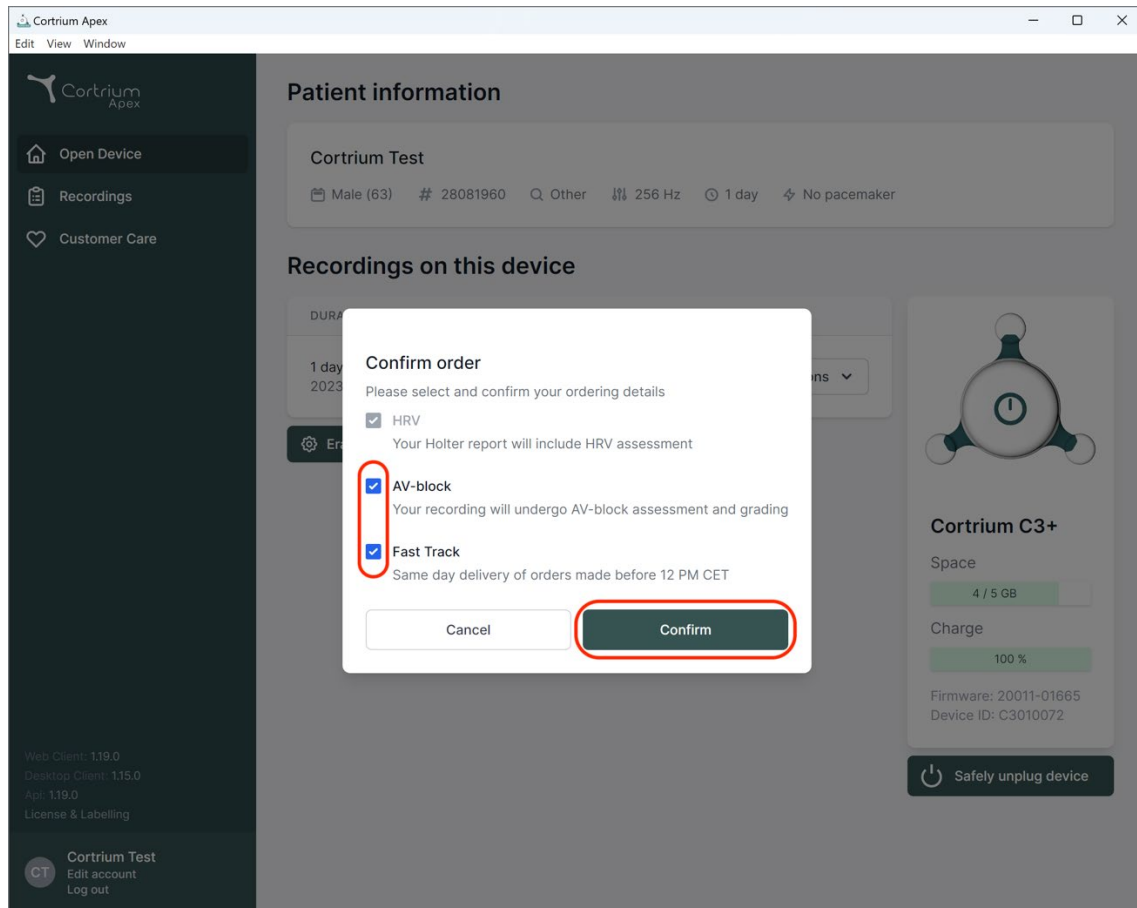


Uw extra opties zijn:

- **HRV:** Uw Holter-rapport bevat een beoordeling van de hartslagvariabiliteit (HRV)
- **AV-blok:** Beoordeling en classificatie van AV-Block door een senior specialist
- **Snelle route:** Levering op dezelfde dag voor bestellingen die voor 12 uur 's middags zijn geplaatst


Als u tevreden bent met de gekozen analyseopties, kunt u op "Bevestigen" klikken om verder te gaan.

Als u extra's hebt gekozen voor uw analyse, krijgt u een bericht te zien waarin staat of u selecties extra kosten met zich meebrengen.

Klik op "Bevestigen" om verder te gaan.

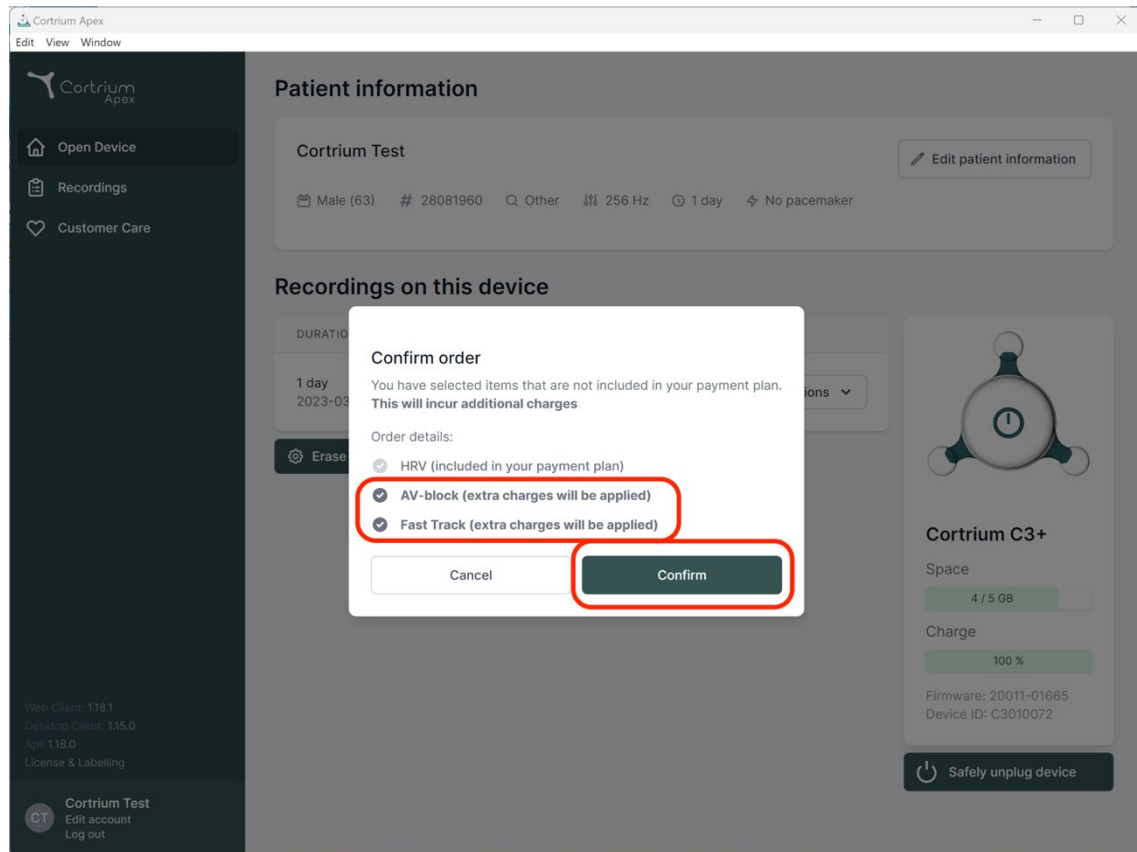

De opname wordt nu geüpload.

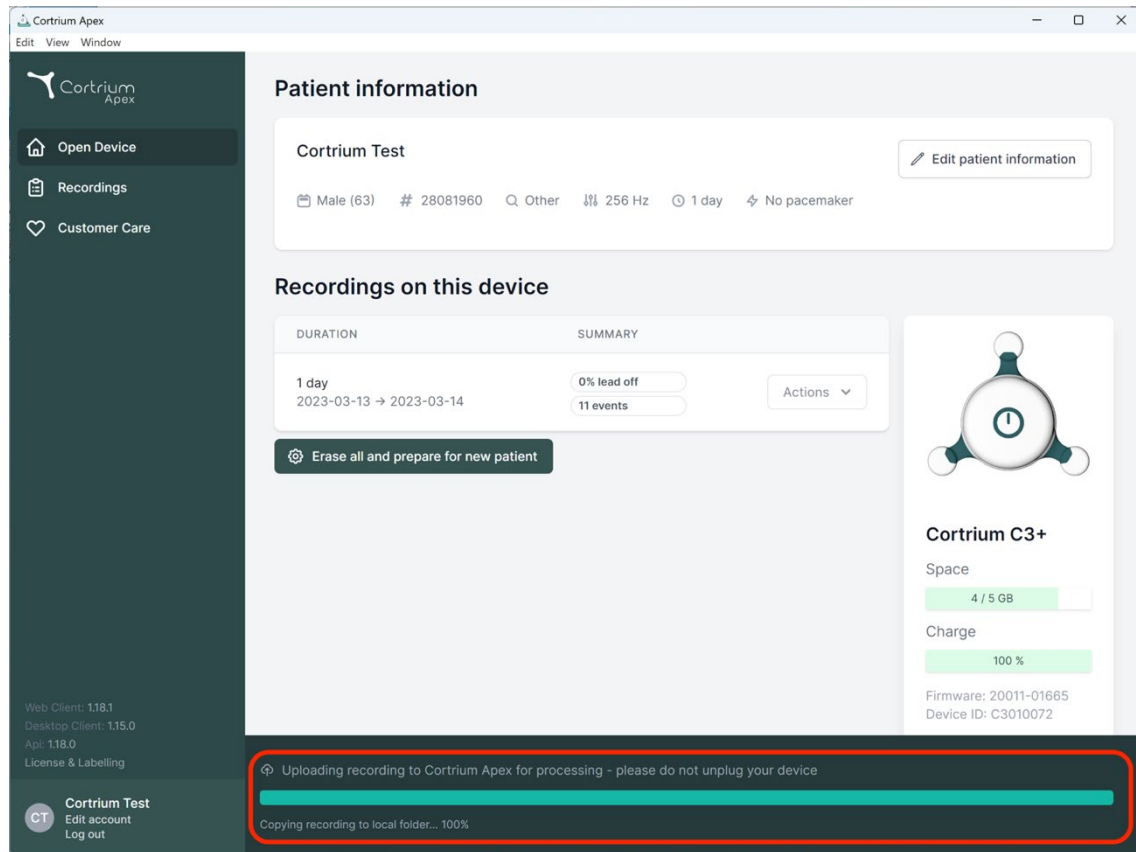

Na het uploaden van de opname wordt het Holter-rapport beschikbaar gesteld wanneer het wordt geanalyseerd. Het apparaat kan al worden voorbereid op een nieuwe patiënt zodra de opname is geüpload.

Afhankelijk van uw accountinstellingen wordt u per e-mail geïnformeerd wanneer het Holter-rapport klaar is om te bekijken. Apex presenteert nieuw ingevulde rapporten met een rode stip voor eenvoudige identificatie.

In de volgende paragraaf wordt uitgelegd hoe u het Holter-rapport kunt bekijken zodra het is geanalyseerd en hoe u de hele opname direct na het uploaden kunt bekijken.


## 6. Holter-rapporten en de hele opname bekijken

In Cortrium Apex kunt u de Holter-rapporten als PDF bekijken en kunt u de volledige opname direct na het uploaden bekijken voor analyse. Hoe u de Holter-rapporten bekijkt, wordt hieronder beschreven en hoe u de "Opnameviewer" gebruikt, wordt uitgelegd in paragraaf 6.2.

### 6.1 Holter-rapporten bekijken

Zodra een opname is geanalyseerd, kunt u het Holter-rapport als PDF bekijken.

Ga hiervoor naar het menu-item "Opnames" en klik op de betreffende patiënt. U kunt dan het PDF-rapport bekijken in de laatste regel onder Holter-rapport. Het Holter-rapport wordt geopend in uw webbrowser.

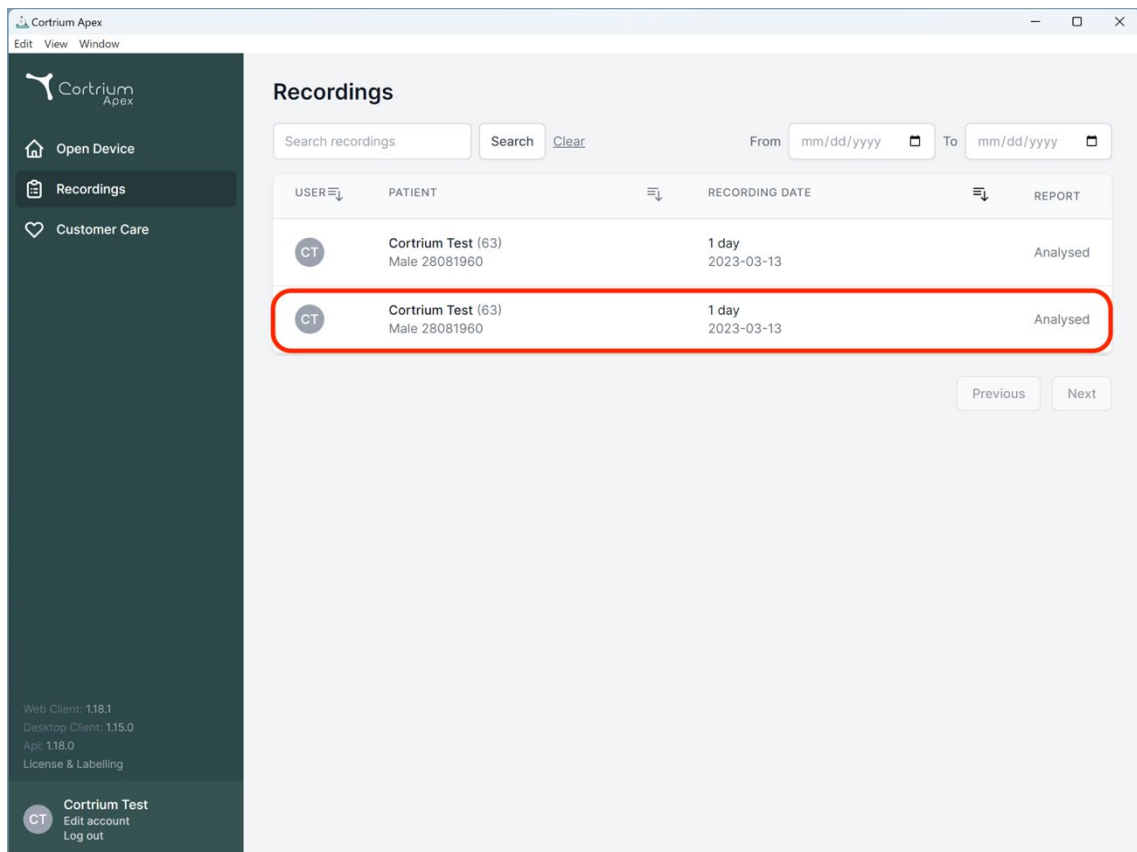

| USER | PATIENT                             | RECORDING DATE      | REPORT   |
|------|-------------------------------------|---------------------|----------|
| CT   | Cortrium Test (63)<br>Male 28081960 | 1 day<br>2023-03-13 | Analysed |
| CT   | Cortrium Test (63)<br>Male 28081960 | 1 day<br>2023-03-13 | Analysed |



Cortrium Apex

Edit View Window



Open Device

Recordings

Customer Care

Web Client: 1.18.1

Desktop Client: 1.15.0

App: 1.18.0

License & Labelling

CT

Cortrium Test

Edit account

Log out

Recording details

Delete recording

Cortrium Test

Edit

Male 1960-08-28 (63) # 28081960 Other

Uploaded By

Cortrium Test Cortrium Internal > Cortrium 2024-01-30 12:31

Recording Summary

1 day 11 events No pacemaker 0.0% lead off

2023-03-13 11:54 256 Hz C3100175

View recording

View >

Download recording in .EDF format

Download

Holter Reports

Order Holter report

Ordered: 2024-02-16 07:36

Delivered: 2024-02-16 13:00

Features ordered:


☒ HRV ☐ AV-block ☐ Fast Track

Edit report

PDF

## 6.2 Opnameviewer

Om de volledige opname na het uploaden te bekijken, klikt u op “Opnames” en selecteert u de patiënt van wie u de opname wilt bekijken (zie eerste screenshot in paragraaf 6.1). U kunt de Opnameviewer gebruiken door op de knop "Bekijken" te drukken.

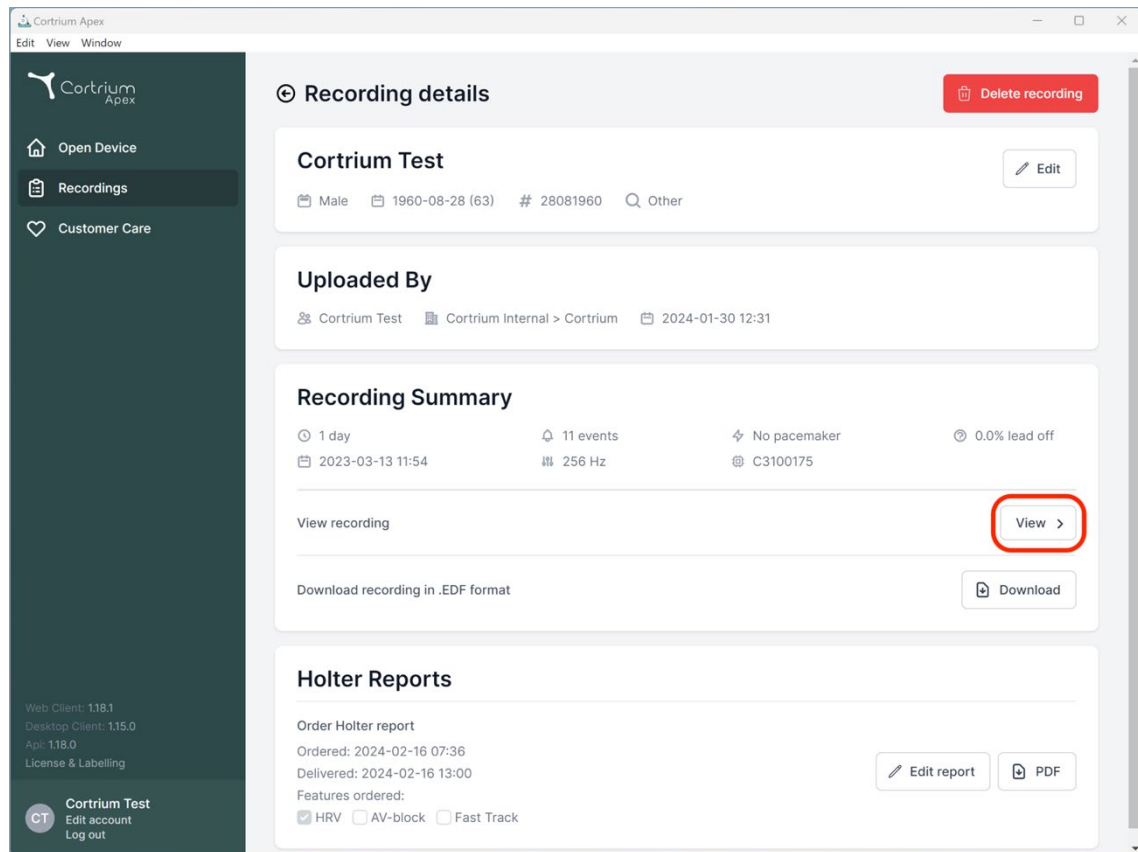


De opnameviewer wordt geopend.

- De viewer laadt 1 minuut gegevens en toont 7 seconden ECG per keer.
- Met de gemarkeerde interactieve functies kunt u de dag, het uur, de minuut en de seconde kiezen die u in de opname wilt zien. Selecteer de tijd en klik op het zoekpictogram om de instelling te bevestigen.
- Door de lichtblauwe balk aan de onderkant van de viewer ingedrukt te houden en te verslepen kunt u de 60 seconden rond het gekozen tijdstip bekijken.
- Door op de navigatiepijlen te klikken of de weergave naar de rand te slepen, kunt u vooruit en achteruit gaan in de opname.
- Als de signaalamplitude laag is, kunt u deze bovendien vergroten door de zoomfunctie te gebruiken.

## Recording viewer

📅 2023-03-13 11:54 → 2023-03-14 11:55 ⌚ 1 day

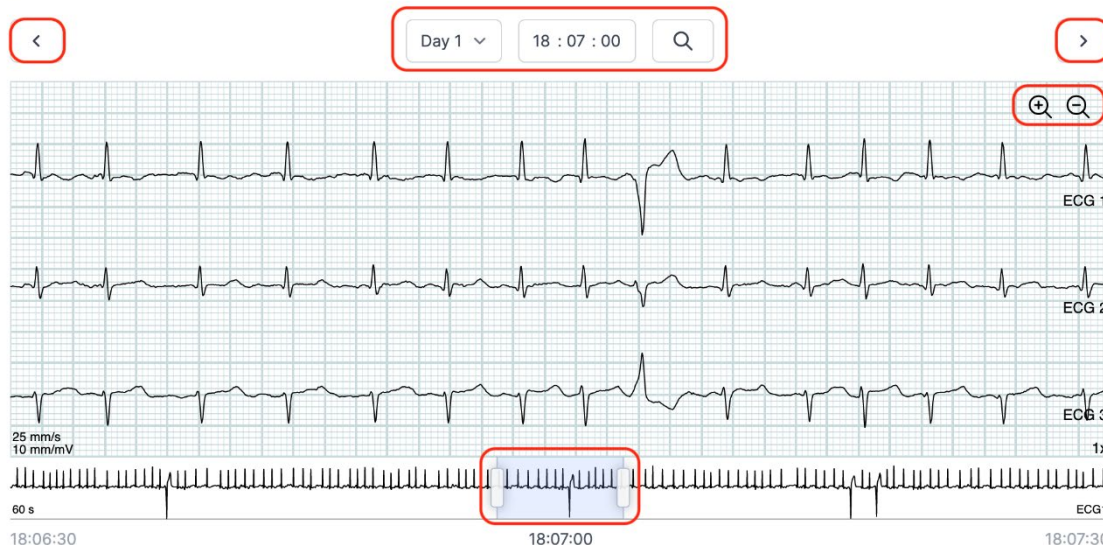

Om de opnameviewer te sluiten, klikt u op de "x" in de rechterbovenhoek.

## 6.3 Samenvatting bewerken

Na ontvangst van uw rapport hebt u de mogelijkheid om de samenvatting te bewerken als u specifieke bewoordingen of informatie hebt die u wilt opnemen.

Klik daartoe op opnamen en selecteer de patiënt van wie u het rapportoverzicht wilt bewerken.

U kunt de samenvatting bewerken door op de knop "Rapport bewerken" te drukken in de laatste regel onder Holter-rapport.


## 7. Patiëntgegevens bewerken en details van opnames bekijken

Nadat u het menu-item "Opnames" hebt geselecteerd, kunt u op een opname klikken om een samenvatting met de bijbehorende details te openen.

De samenvatting van de opnames bevat details als:


- Duur van de opname
- Startdatum en -tijd
- Lead-off, d.w.z. perioden waarin de elektroden niet in contact waren met het lichaam
- Gebeurtenissen, als de patiënt op de knop heeft gedrukt om symptomen of een gebeurtenis aan te geven

- Bemonsteringsfrequentie van het ECG-signaal
- Informatie over de pacemaker indien opgemerkt bij de voorbereiding van het apparaat voor een nieuwe patiënt

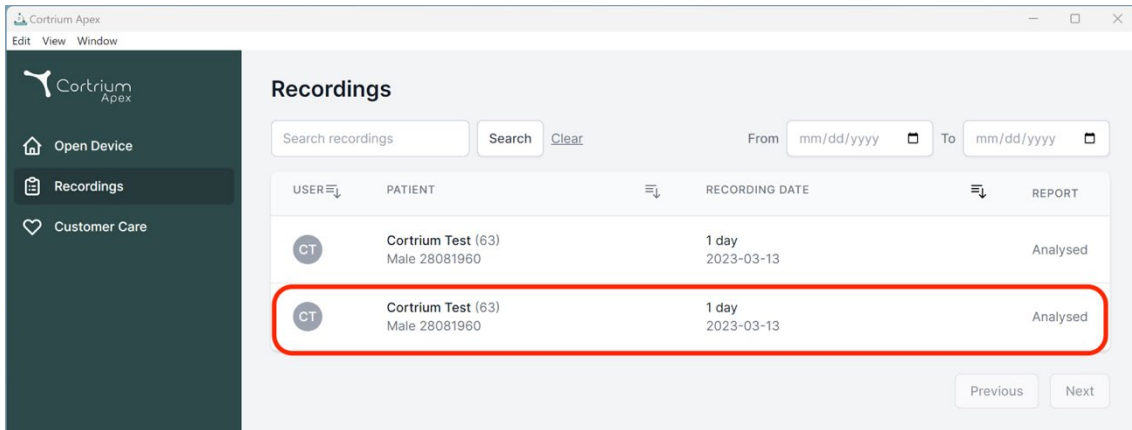

| USER | PATIENT                             | RECORDING DATE      | REPORT   |
|------|-------------------------------------|---------------------|----------|
| CT   | Cortrium Test (63)<br>Male 28081960 | 1 day<br>2023-03-13 | Analysed |
| CT   | Cortrium Test (63)<br>Male 28081960 | 1 day<br>2023-03-13 | Analysed |

De patiëntinformatie kan worden bewerkt door op de knop "Bewerken" te klikken.

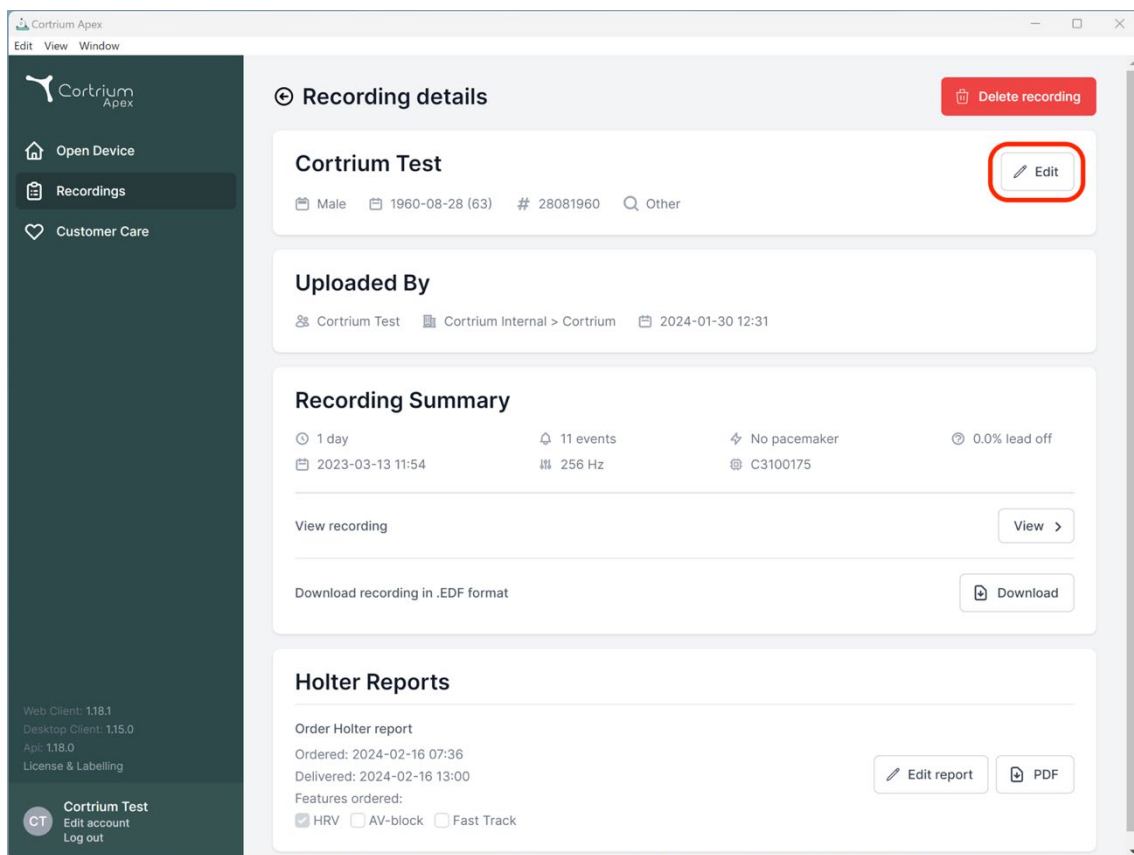

### Recording details

**Cortrium Test**

Male 1960-08-28 (63) # 28081960 Other

**Uploaded By**

Cortrium Test Cortrium Internal > Cortrium 2024-01-30 12:31

**Recording Summary**

1 day 11 events No pacemaker 0.0% lead off

2023-03-13 11:54 256 Hz C3100175

View recording View

Download recording in .EDF format Download

**Holter Reports**

Order Holter report

Ordered: 2024-02-16 07:36  
Delivered: 2024-02-16 13:00

Features ordered:

☒ HRV ☐ AV-block ☐ Fast Track

Edit report PDF

De aanpassingen kunnen worden opgeslagen door op de knop "Opslaan" te klikken.

Cortrium Apex  
Edit View Window

Cortrium Apex

Open Device

Recordings

Customer Care

### Recording details

**Cortrium Test** Edit

Male 1960-08-28 (63) # 28081960 Other

**Patient**

Patient ID: 28081960 Date of birth: 08/28/1960

First name: Cortrium Last name: Test

Gender: ☐ Female ☒ Male ☐ Other Reason for recording: Other

**Notes**

Notes on patient or recording

Cancel Save

Web Client: 118.1  
Desktop Client: 115.0  
App: 118.0  
License & Labelling

CT Cortrium Test  
Edit account  
Log out

Order Holter report

Ordered: 2024-02-16 07:36  
Delivered: 2024-02-16 13:00

Features ordered:  
☒ HRV ☐ AV-block ☐ Fast Track

0.0% lead off

View >

Download


Edit report PDF

Delete recording

## 8. Een opname verwijderen

Om een opname te verwijderen, opent u het gedeelte "Opnames" en klikt u op de opname die u wilt verwijderen.

Klik nu op "Opname verwijderen" in de rechterbovenhoek. Na het invoeren van de naam van de patiënt moet het verwijderen worden bevestigd door op "Verwijderen" te drukken.

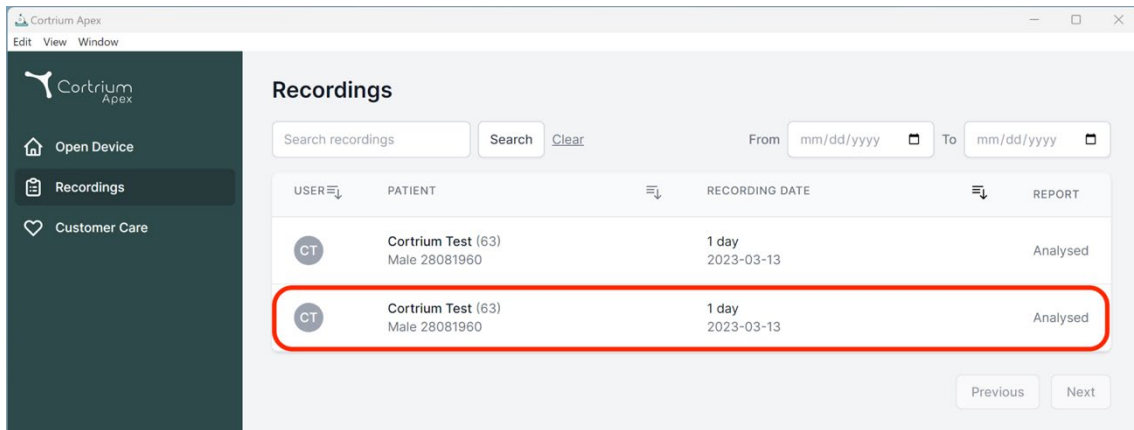


**Recordings**

Search recordings  Search [Clear](#) From  To

| USER | PATIENT                             | RECORDING DATE      | REPORT   |
|------|-------------------------------------|---------------------|----------|
| CT   | Cortrium Test (63)<br>Male 28081960 | 1 day<br>2023-03-13 | Analysed |
| CT   | Cortrium Test (63)<br>Male 28081960 | 1 day<br>2023-03-13 | Analysed |

Previous Next

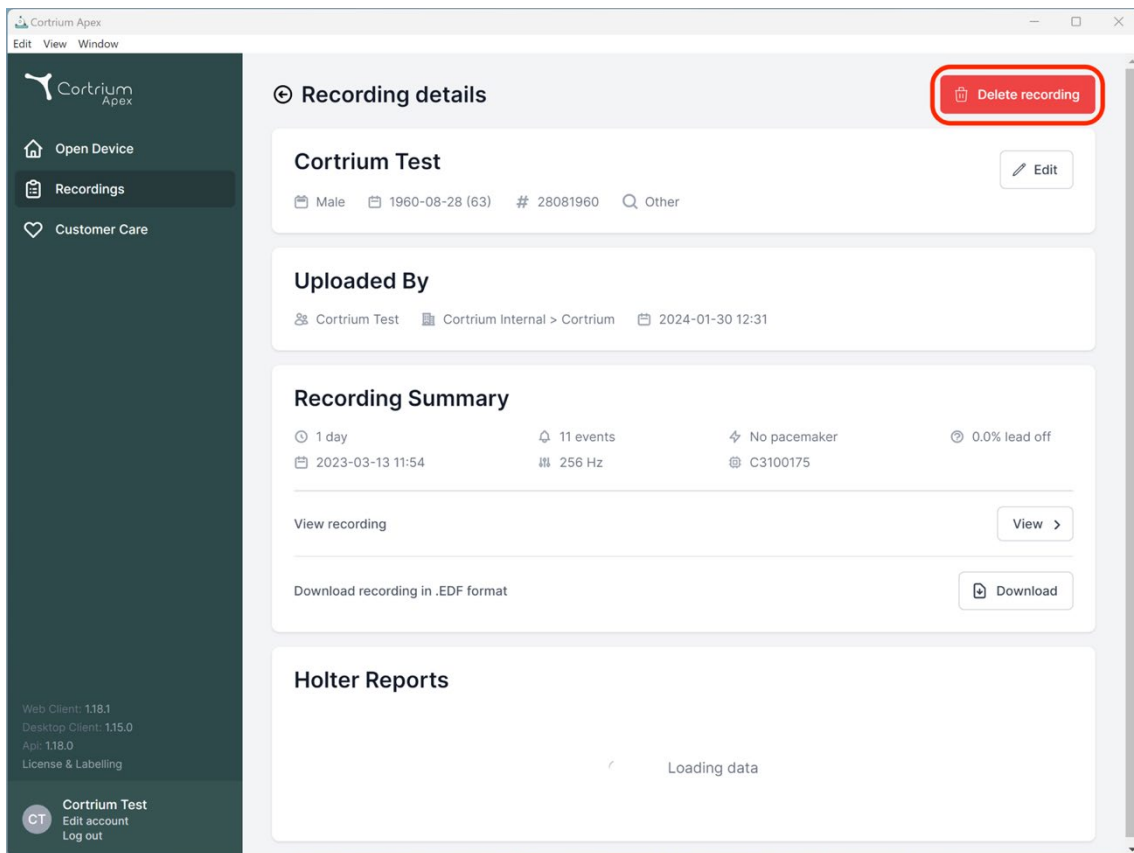

**Recording details** Delete recording

**Cortrium Test** Edit

Male 1960-08-28 (63) # 28081960 Other

**Uploaded By**

Cortrium Test Cortrium Internal > Cortrium 2024-01-30 12:31

**Recording Summary**

1 day 11 events No pacemaker 0.0% lead off  
2023-03-13 11:54 256 Hz C3100175

View recording View >

Download recording in .EDF format Download

**Holter Reports**

Loading data

Web Client: 1.18.1  
Desktop Client: 1.15.0  
API: 1.18.0  
License & Labelling

CT Cortrium Test  
Edit account  
Log out

Cortrium Apex  
Edit View Window

 Cortrium Apex

 Open Device

 Recordings

 Customer Care

Web Client: 118.1  
Desktop Client: 115.0  
App: 118.0  
License & Labelling

 Cortrium Test  
Edit account  
Log out

### Recording details



#### Cortrium Test


 Male  1960-08-28 (63)  # 28081960  Other 

#### Uploaded By

 Cortrium Test  Cortrium Internal > Cortrium  2024-01-30 12:31

**Confirm delete**  
You are removing Cortrium Test

To confirm delete, please write 'Cortrium Test' in the input field

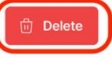0.0% lead off

 View >

Download recording in .EDF format 

#### Holter Reports

Loading data


## 9. EDF-bestand downloaden

Het EDF-bestand kan worden gedownload voordat u het Holter-rapport bestelt of daarna. De twee verschillende gevallen worden bij de volgende punten beschreven.

### 9.1 Het EDF-bestand downloaden voor het bestellen van een Holter-rapport


Volg deze stappen om een opname te converteren naar EDF-formaat:

- Sluit de C3w/C3<sup>+</sup>-Holtermonitor aan op de computer en druk op de knop "Apparaat openen" in het linkermenu.
- Klik op de knop "Acties" en selecteer "Uploaden en exporteren als EDF".

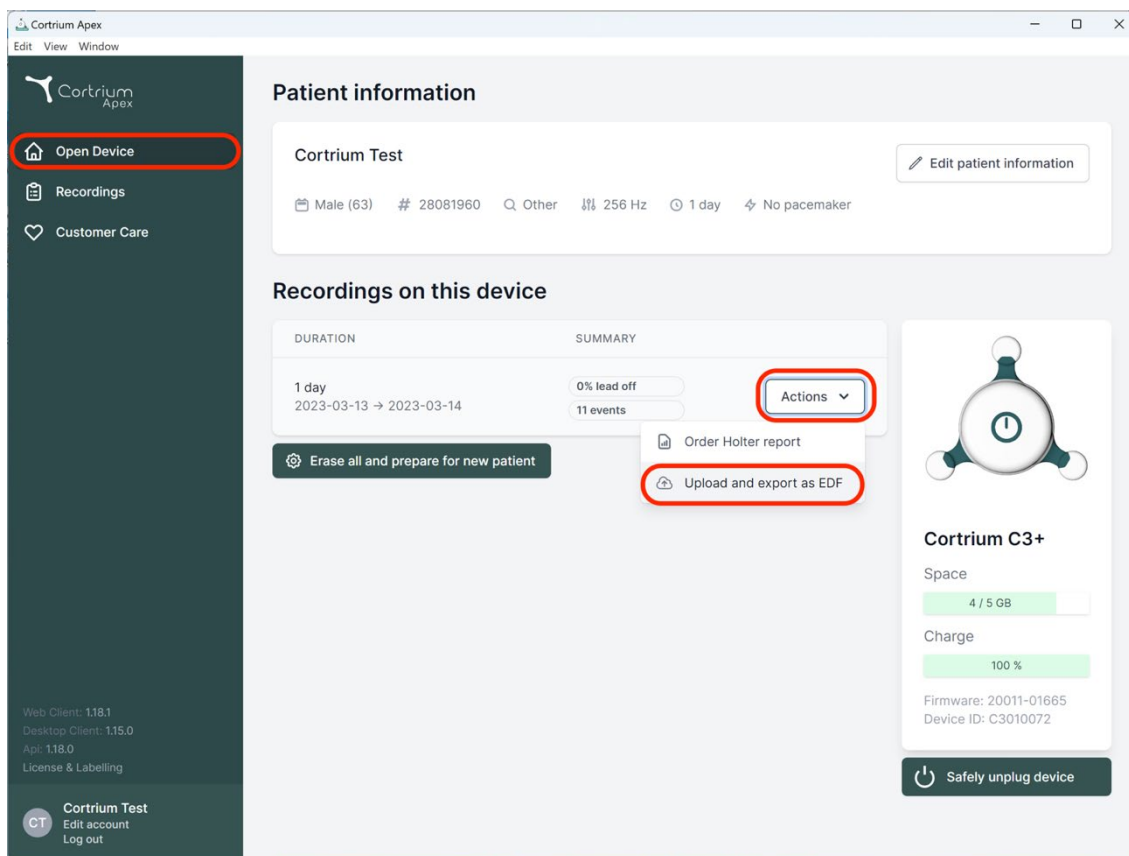

- De opname wordt overgebracht naar Apex.
- Wanneer de overdracht is voltooid, verandert de knop "Acties" in "Bekijken".



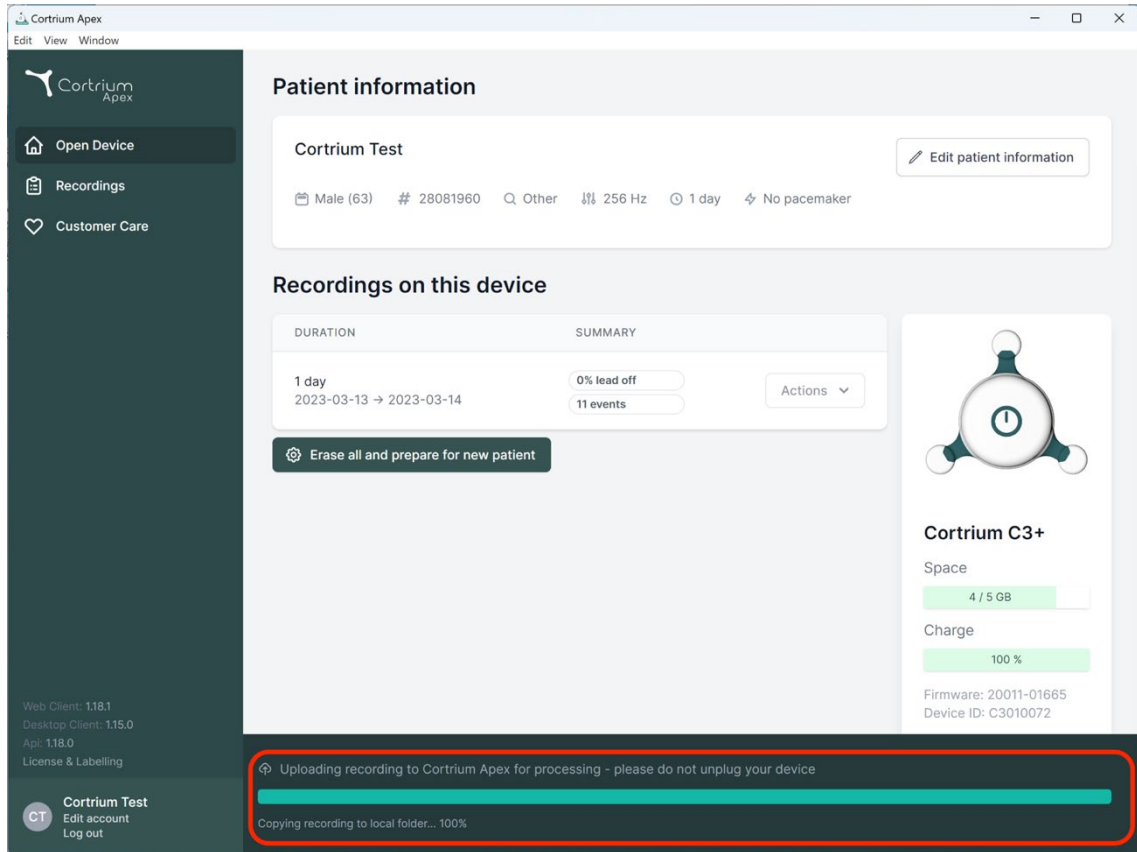

**Cortrium Apex**  
Edit View Window

**Patient information**

**Cortrium Test** [Edit patient information](#)

Male (63) # 28081960 Q Other 256 Hz 1 day No pacemaker

**Recordings on this device**

| DURATION                         | SUMMARY                  |                         |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 day<br>2023-03-13 → 2023-03-14 | 0% lead off<br>11 events | <a href="#">Actions</a> |

[Erase all and prepare for new patient](#)

**Cortrium C3+**

Space: 4 / 5 GB

Charge: 100 %


Firmware: 20011-01665  
Device ID: C3010072

Uploading recording to Cortrium Apex for processing - please do not unplug your device

Copying recording to local folder... 100%

Web Client: 118.1  
Desktop Client: 115.0  
App: 118.0  
License & Labelling

**Cortrium Test**  
Edit account  
Log out

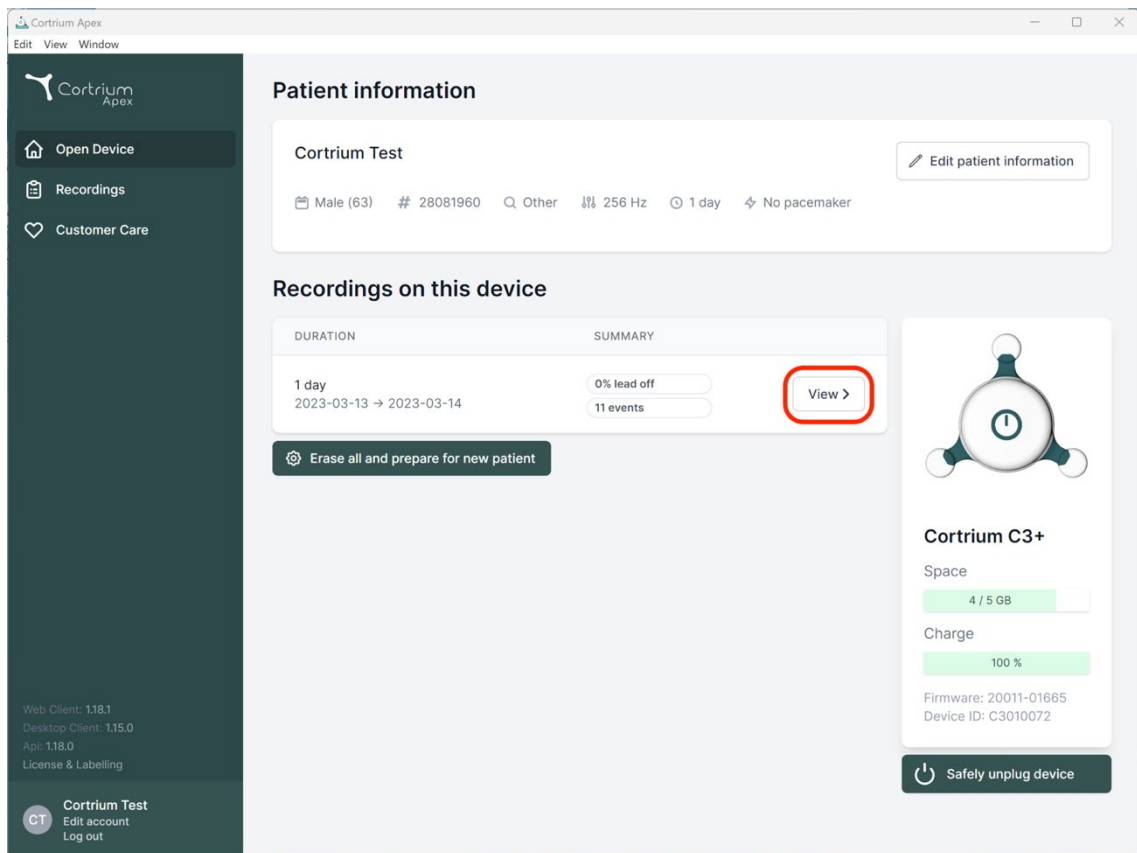

**Cortrium Apex**  
Edit View Window

**Patient information**

**Cortrium Test** [Edit patient information](#)

Male (63) # 28081960 Q Other 256 Hz 1 day No pacemaker

**Recordings on this device**

| DURATION                         | SUMMARY                  |                           |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 day<br>2023-03-13 → 2023-03-14 | 0% lead off<br>11 events | <a href="#">View &gt;</a> |

[Erase all and prepare for new patient](#)

**Cortrium C3+**

Space: 4 / 5 GB

Charge: 100 %

Firmware: 20011-01665  
Device ID: C3010072


[Safety unplug device](#)

Web Client: 118.1  
Desktop Client: 115.0  
App: 118.0  
License & Labelling

**Cortrium Test**  
Edit account  
Log out

- Klik op de knop "Bekijken" om het opnameoverzicht te zien.

- Het sub-item "Rapport downloaden in EDF-formaat" toont de volgende informatie:
  - Terwijl de opname wordt omgezet, wordt de voortgang weergegeven
  - Wanneer het EDF-bestand klaar is, klikt u op de knop "Downloaden" om het EDF-bestand op uw computer op te slaan

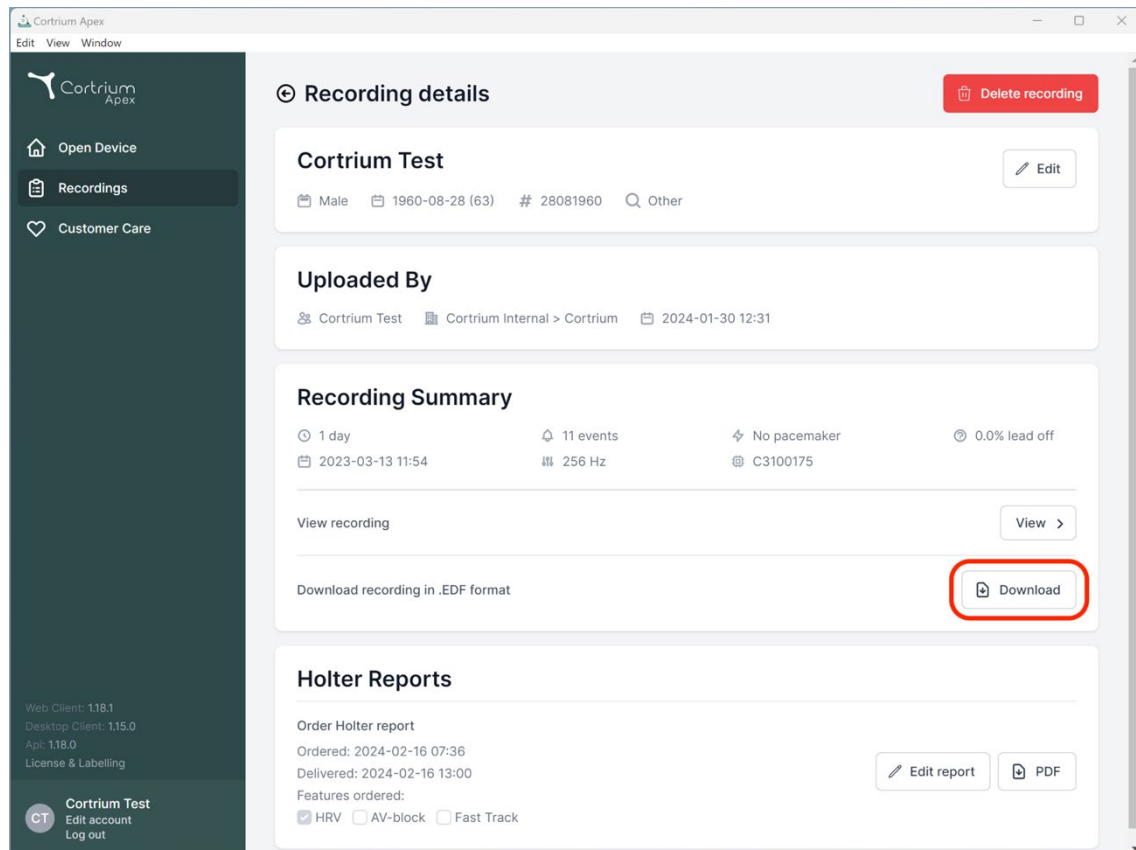


## 9.2 Het EDF-bestand downloaden na het bestellen van een Holter-rapport

Als u zojuist een rapport van een opname hebt besteld en nu de opname in EDF-formaat wilt downloaden, gaat u als volgt te werk:

- Wanneer het apparaat is aangesloten, klikt u op het menu-item "Apparaat openen" en vervolgens op de knop "Bekijken" naast de opname.
- Klik in het scherm "Opnamedetails" op "Downloaden" om het EDF-bestand te downloaden.

Als u een eerdere opname in EDF-formaat wilt downloaden:

- Klik op het menu-item "Opnames"
- Klik op de opname die u wilt downloaden in EDF-formaat
- En klik dan op "Downloaden" zoals hieronder afgebeeld

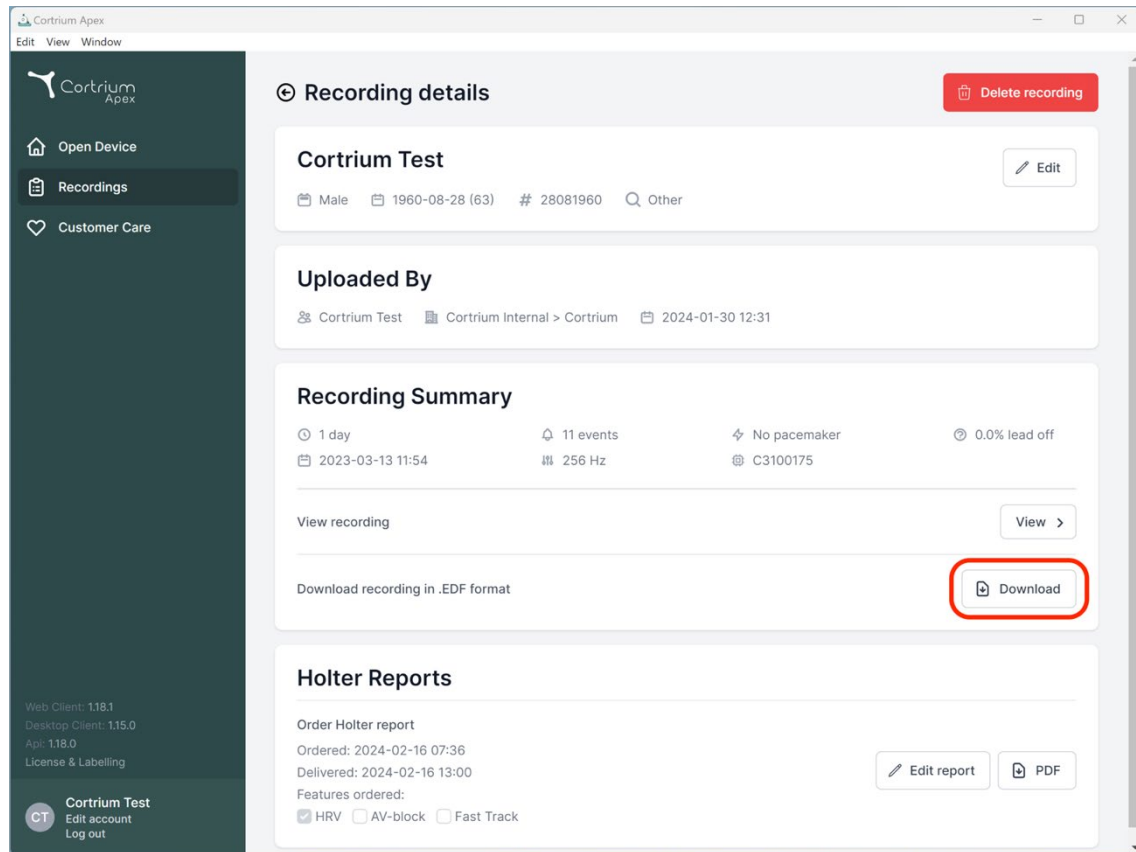

## 10. Uitloggen bij Cortrium Apex

Vergeet niet uit te loggen door te klikken op de knop "Uitloggen" in de linkerbenedenhoek.

Cortrium Apex zal automatisch uitloggen van uw gebruikersaccount na een lange periode van inactiviteit.

Als uw instelling meerdere gebruikers heeft met aparte accounts voor Cortrium Apex, maar de gebruikers werken vanaf dezelfde computer, zorg er dan voor dat u uitlogt uit Cortrium Apex als u klaar bent met uw taken.

## 11. Software-updates

Bij het opstarten controleert de app automatisch of er updates beschikbaar zijn en installeert ze onmiddellijk.

## 12. Minimale technische vereisten

De minimale vereisten voor de werking van Cortrium Apex zijn:

- Windows 10 of MacOS 11 Big Sur (Intel).
- 1280 x 960 pixel schermresolutie.
- 4 GB RAM.
- 5 GB vrije ruimte op de harde schijf.
- Internetverbinding.

Cortrium Apex vereist een internetverbinding. De uploadsnelheid van de verbinding bepaalt de tijd die nodig is om een opname te uploaden wanneer u een rapport bestelt of de opname converteert naar een ander formaat. De downloadsnelheid bepaalt de tijd die nodig is om een geconverteerde opname te downloaden.

Het downloaden en bekijken van een rapport duurt gewoonlijk slechts enkele seconden op een internetverbinding van 10 Mbps.

## 13. Problemen oplossen

### 13.1 "Het apparaat lijkt te zijn ingesteld voor een patiënt..."

Als u de waarschuwing ziet: *"Waarschuwing. Het apparaat lijkt te zijn ingesteld voor een patiënt, maar we kunnen de patiëntgegevens niet vinden in het systeem. Stel een patiënt in voor de opnames"*, klik gewoon op de knop "Patiëntgegevens toevoegen" om het apparaat in te stellen voor gebruik met Cortrium Apex. Hierdoor worden de gegevens op het apparaat niet verwijderd.

### 13.2 Opnameoverzicht toont "n/a lead off" of "n/a events"

Als het opnameoverzicht "n/a lead off" of "n/a events" toont, komt dit doordat de firmware op de aangesloten C3w/C3<sup>+</sup>-eenheid een versie is die geen directe lead-off of gebeurtenissamenvatting ondersteunt. De opname is echter nog steeds geldig.

### 13.3 De internetverbinding is onderbroken.

Als u het bericht "Cortrium Apex heeft problemen met toegang tot het internet" ziet, is uw internetverbinding mogelijk onderbroken of verbroken. Neem contact op met de IT-afdeling van uw instelling of uw internetprovider voor hulp bij het herstellen van uw internetverbinding.

- Cortrium Apex probeert automatisch opnieuw verbinding te maken met het internet.  
Een bericht geeft aan wanneer de volgende verbindingsooging wordt gedaan
- Als er geen internetverbinding is wanneer Cortrium Apex wordt opgestart, verschijnt er een bericht dat u offline lijkt te zijn
- Als u een opname aan het overdragen was toen de internetverbinding werd verbroken, moet u de overdracht opnieuw starten wanneer de verbinding is hersteld

### 13.4 Apex is net geïnstalleerd maar opent niet

Dit probleem kan ontstaan doordat een firewall de Cortrium Apex-applicatie blokkeert. Indien Apex niet start vanwege een firewall, zorg er dan voor dat de URL-links in deel 16 "Infrastructuur verklaring" gedeblokkeerd of "gewhitelist" zijn in de firewall. Neem contact op met de IT-afdeling van uw instelling voor ondersteuning.

## 14. Beveiligingsinformatie

### Gebruikersbeheer

- Iedere gebruiker van Cortrium Apex moet een eigen account gebruiken.  
U kunt zoveel gebruikersaccounts aanmaken en verwijderen als u nodig heeft op <https://apex.cortrium.com>  
Het is belangrijk dat u kunt bepalen en regelen wie toegang heeft tot de gevoelige gegevens van uw patiënten.

### Wachtwoorden

- Zorg ervoor dat u een veilig wachtwoord gebruikt
- Deel uw login en/of wachtwoord niet met anderen
- Vermijd het gebruik van hetzelfde wachtwoord voor meerdere accounts  
Hergebruik van hetzelfde wachtwoord kan ertoe leiden dat een buitenstaander toegang krijgt tot al uw systemen en computers, als slechts één wachtwoord in verkeerde handen valt.
- Vergeet niet uit te loggen bij Cortrium Apex  
Als u ingelogd blijft, lijkt het alsof de acties van andere gebruikers in het systeem van u zijn

### Encryptie en aanvullende bescherming

Voordat u Cortrium Apex op een computer installeert raden wij u aan:

- Schijfversleuteling in te schakelen  
Bij verlies of diefstal van de computer zijn gevoelige gegevens op de computer niet leesbaar

- Automatische systeemupdates in te schakelen  
Verhoogt de kans dat de computer up-to-date blijft met beveiligingsupdates
- Ingebouwde beveiligingssoftware in te schakelen (bijv. Windows Security) indien beschikbaar
- Firewall-, anti-malware-, anti-phishing- en anti-virusbescherming zijn ingebouwd in Windows. Wij raden u ten eerste aan het in te schakelen.

## 15. Etikettering en symbolen

Hieronder vindt u een overzicht van de etikettering en symbolen in Cortrium Apex:



**Cortrium Apex** UDI:(01)05745000379033(8012)1.15.0

*Voorbeeld van label*

| Symbool                                                                             | Naam                                                                     | Eis / opmerking   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | Productiedatum                                                           | ISO 15223-1       |
|  | Plaats van productie                                                     | ISO 7000 - 3082   |
|  | Zie de gebruiksaanwijzing/het boekje                                     | ISO 7000 - 1641   |
|  | Waarschuwbord                                                            | ISO 7000 - 0434A  |
|  | CE-gekeurd apparaat met identificatienummer van de aanmeldende instantie | MDR (EU/745/2017) |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| <b>MD</b> | Medisch apparaat | ISO 15223-1:2021 |
|-----------|------------------|------------------|

## 16. Infrastructuurverklaring

Cortrium ApS verklaart dat zijn product, Cortrium Apex, wordt ingezet in de Microsoft Azure cloud computing service. Sommige URL's zijn afhankelijk van de plaats waar het product wordt gebruikt. De onderstaande tabel bevat adressen die door het systeem worden gebruikt:

| URL                                                                                                               | Beschrijving                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <a href="https://api.apex.cortrium.com">api.apex.cortrium.com</a>                                                 | Cortrium Apex API.                              |
| <a href="https://viewer.apex.cortrium.com">viewer.apex.cortrium.com</a>                                           | Cortrium Recording Viewer API.                  |
| <a href="https://apex.cortrium.com">apex.cortrium.com</a>                                                         | Cortrium Apex administrator interface.          |
| <a href="https://client.apex.cortrium.com">client.apex.cortrium.com</a>                                           | Cortrium Apex web client.                       |
| <a href="https://login.cortrium.com">login.cortrium.com</a>                                                       | Auth0 login endpoint.                           |
| <a href="https://assets.apex.cortrium.com">assets.apex.cortrium.com</a>                                           | Assets downloaden, zoals Desktop Client.        |
| <a href="https://support.cortrium.com">support.cortrium.com</a>                                                   | Support website.                                |
| <a href="https://cortriumukrecordingapex.blob.core.windows.net">cortriumukrecordingapex.blob.core.windows.net</a> | Recordings blob storage (UK South).             |
| <a href="https://cortriumfreecordingapex.blob.core.windows.net">cortriumfreecordingapex.blob.core.windows.net</a> | Recordings blob storage (France Central).       |
| <a href="https://cortriumeurecordingapex.blob.core.windows.net">cortriumeurecordingapex.blob.core.windows.net</a> | Recordings blob storage (Germany West Central). |
| <a href="https://cortriumaurecordingapex.blob.core.windows.net">cortriumaurecordingapex.blob.core.windows.net</a> | Recordings blob storage (Australia East).       |
| <a href="https://rt.services.visualstudio.com">rt.services.visualstudio.com</a>                                   | Gebruikt door Microsoft Azure                   |
| <a href="https://dc.services.visualstudio.com">dc.services.visualstudio.com</a>                                   | Application Insights (telemetrie).              |

Poort 443 (HTTPS) moet worden geopend voor alle bovenstaande URL's. De eerste 7 regels van deze lijst kan worden vereenvoudigd door het hele Cortrium-domein (\*.cortrium.com) te whitelisten. Dit verkleint ook het risico dat er in de toekomst aanpassingen moeten worden gedaan als deze lijst verandert.

## Bijlage I

### i. Beschikbare integraties


De volgende integraties zijn landspecifiek en daarom niet voor alle klanten ingeschakeld:

- **GDT patiëntendossier**  
Hiermee kan Apex een patiënt instellen met behulp van een GDT-patiëntbestand.
- **DICOM ingekapseld rapport**  
Hiermee kan Apex een rapport downloaden dat is ingekapseld in DICOM-geformatteerde patiëntinformatie.
- **Opzoeken van reanimatiepatiënten**  
Hiermee kan Apex een patiënt instellen met behulp van een Deens reanimatienummer.
- **Verwijzing van patiënten**  
Met het verwijzingsproces kunnen zorgverleners verwijzingsdocumenten toevoegen en beheren wanneer ze een opname bestellen. Dit zorgt ervoor dat relevante patiëntinformatie beschikbaar is voor beoordeling of facturering tijdens het analyse- en rapportageproces.
- **Goedkeuringsstroom voor rapporten**  
De goedkeuringsstroom voor rapporten zorgt ervoor dat rapporten binnen het proces een gestructureerde beoordeling ondergaan door een externe goedkeurder voordat ze aan de aanvrager worden geleverd.
- **Nereida-patiëntopzoeking en -rapportage**  
Deze integratie maakt het mogelijk om patiënten op te zoeken en automatisch rapporten op te halen uit het externe Nereida Patient-systeem.



## ii. GDT patiëntendossier

- Klik om het GDT patiëntbestand te selecteren of sleep het naar het GDT invoerveld in Apex.
- Nadat het bestand is geladen, worden de patiëntgegevens ingevuld.
- Geladen informatie kan niet worden bewerkt.

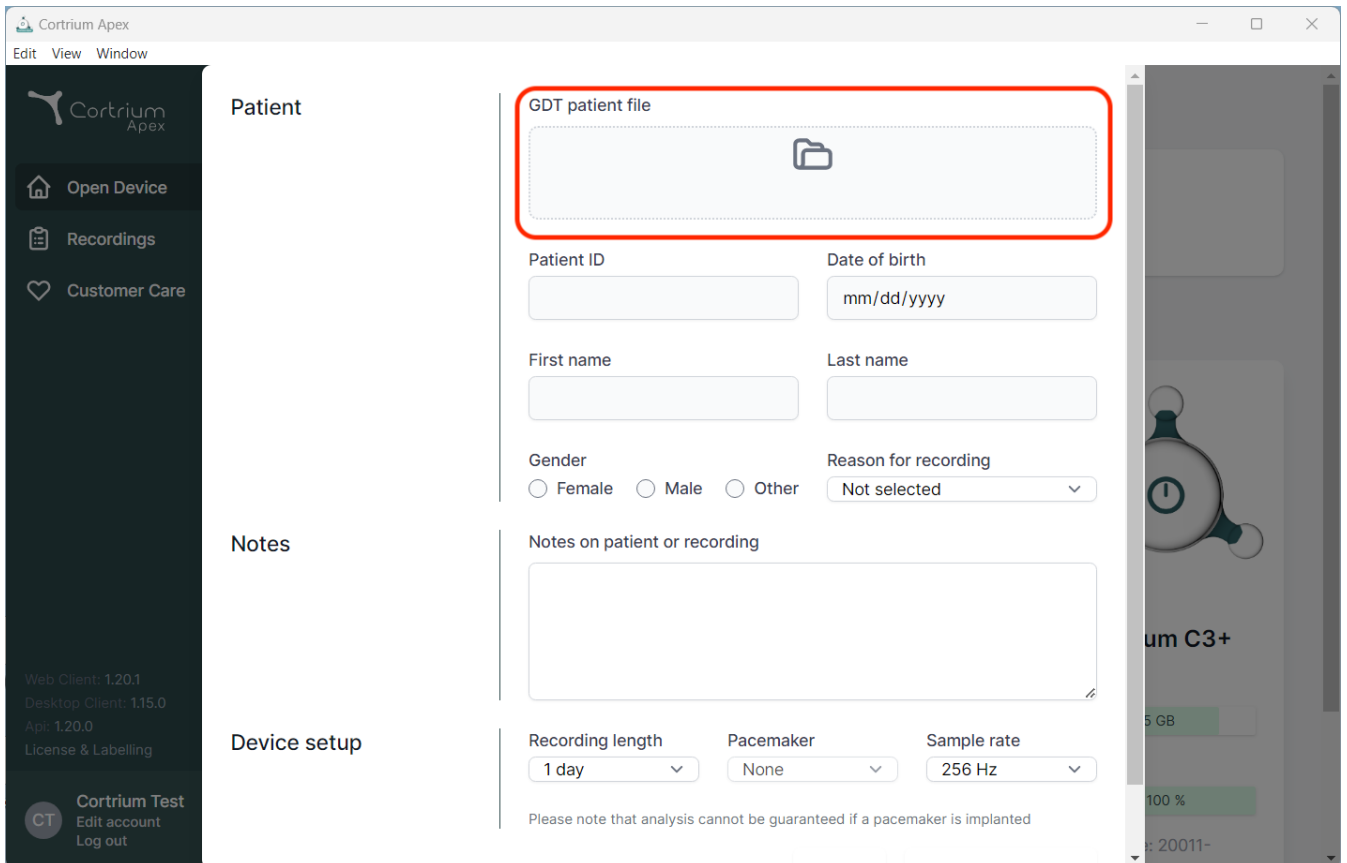

The screenshot displays the Cortrium Apex web application interface. The left sidebar contains navigation links: "Open Device", "Recordings", and "Customer Care". Below these are version details: "Web Client: 1.20.1", "Desktop Client: 1.15.0", and "Api: 1.20.0". At the bottom of the sidebar is a "Cortrium Test" section with "Edit account" and "Log out" options.


The main content area is divided into three sections:

- Patient:** This section contains a "GDT patient file" upload area, which is highlighted with a red rectangle. Below this are input fields for "Patient ID", "Date of birth" (with a "mm/dd/yyyy" placeholder), "First name", and "Last name". There are also radio buttons for "Gender" (Female, Male, Other) and a dropdown menu for "Reason for recording" (currently set to "Not selected").
- Notes:** This section has a text area labeled "Notes on patient or recording".
- Device setup:** This section includes dropdown menus for "Recording length" (set to "1 day"), "Pacemaker" (set to "None"), and "Sample rate" (set to "256 Hz"). A note below these fields states: "Please note that analysis cannot be guaranteed if a pacemaker is implanted".

On the right side of the interface, a partial view of a device model, "Cortrium C3+", is visible, showing a battery level of "100 %" and a storage capacity of "5 GB".

### iii. DICOM ingekapseld rapport

- Om het ingekapselde DICOM-rapport te downloaden, klikt u op de downloadknop in het gedeelte Holterrappport onder de geselecteerde patiënt.
- Zodra op de knop wordt geklikt, wordt het bestand gedownload. Het bestand eindigt met .DCM.

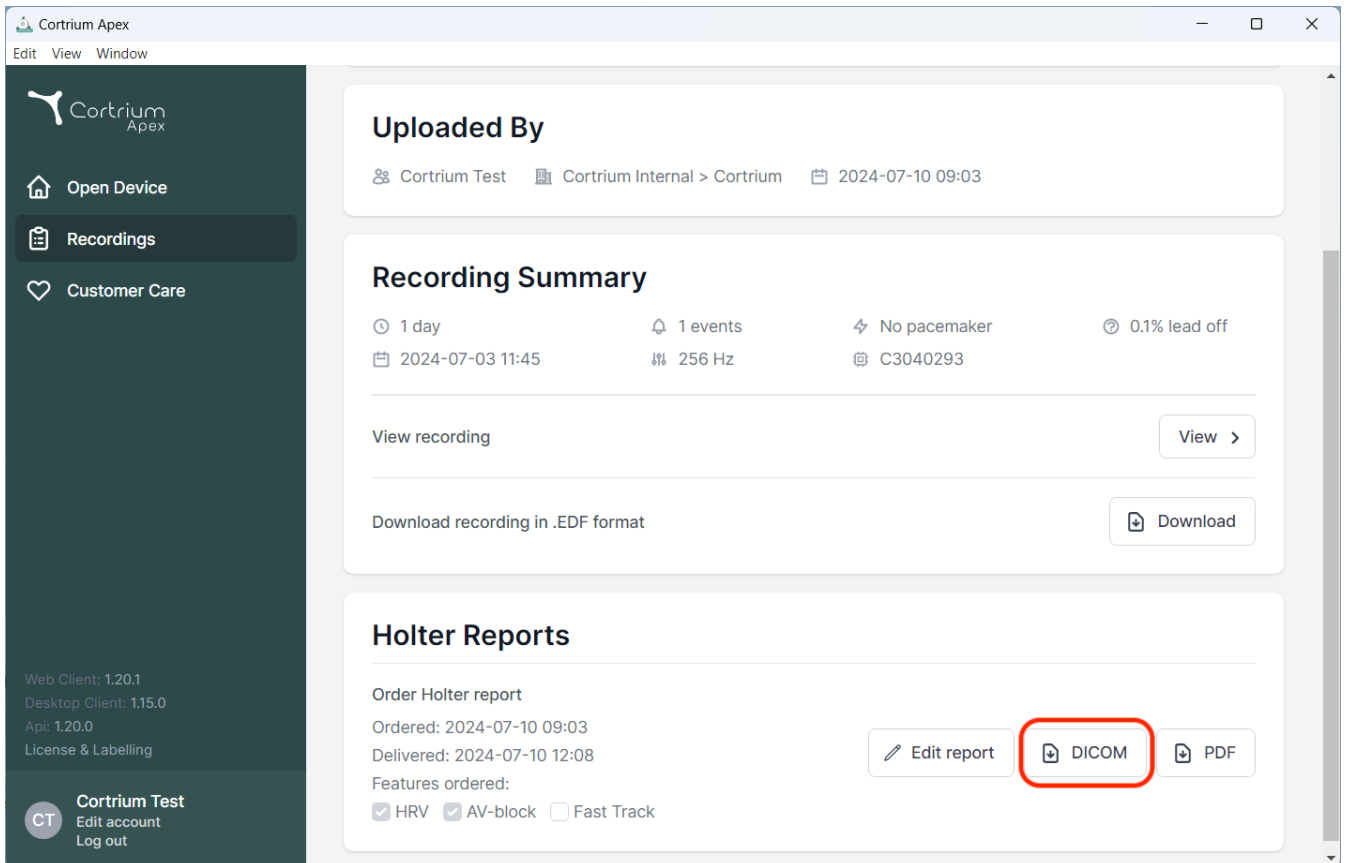

The screenshot displays the Cortrium Apex web application interface. On the left is a dark sidebar with navigation links: 'Open Device', 'Recordings', and 'Customer Care'. Below these are version details (Web Client: 1.20.1, Desktop Client: 1.15.0, Api: 1.20.0, License & Labelling) and a user profile for 'Cortrium Test' with options to 'Edit account' and 'Log out'. The main content area has a top section 'Uploaded By' showing 'Cortrium Test' and a date '2024-07-10 09:03'. Below this is the 'Recording Summary' section with details like '1 day', '1 events', 'No pacemaker', and '0.1% lead off'. It includes buttons for 'View recording' and 'Download'. The bottom section is 'Holter Reports', showing 'Order Holter report' with dates and a list of features ordered (HRV, AV-block, Fast Track). At the bottom right of this section are three buttons: 'Edit report', 'DICOM' (highlighted with a red box), and 'PDF'.

- De stationsnaam is standaard de naam van de machine/computer. Dit kan aangepast worden in het individuele gebruikersprofiel onder Account bewerken.

Cortrium Apex

Edit View Window



Open Device

Recordings

Customer Care

Web Client: 1.23.0

Desktop Client: 1.23.0

Api: 1.23.0

License & Labelling

CT

Cortrium Test

Edit account

Log out

## Account information

### Account information

If you change your email address you need to confirm the new address

Title

Initials

CT

First name

Cortrium

Last name

Test

Email address

testreports@cortrium.onmicrosoft.com

Reset password

### Account preferences

Here you change preferences for your account

### Set preferences

×

Notify when a Holter report is ready

You will receive a notification by email when a Holter report is ready.

### DICOM report preferences

Here you can change preferences for the DICOM report integration


Station name

Leave blank to use computer name

Save changes

#### iv. Opzoeken van reanimatiepatiënten

- Voer de Deense CPR van de patiënt in het veld in en druk op "Zoeken".
- De patiëntinformatie wordt opgehaald uit het reanimatieregister.
- De opgehaalde informatie wordt ingevuld in de patiëntinformatievelden.
- Geladen informatie kan niet worden bewerkt.

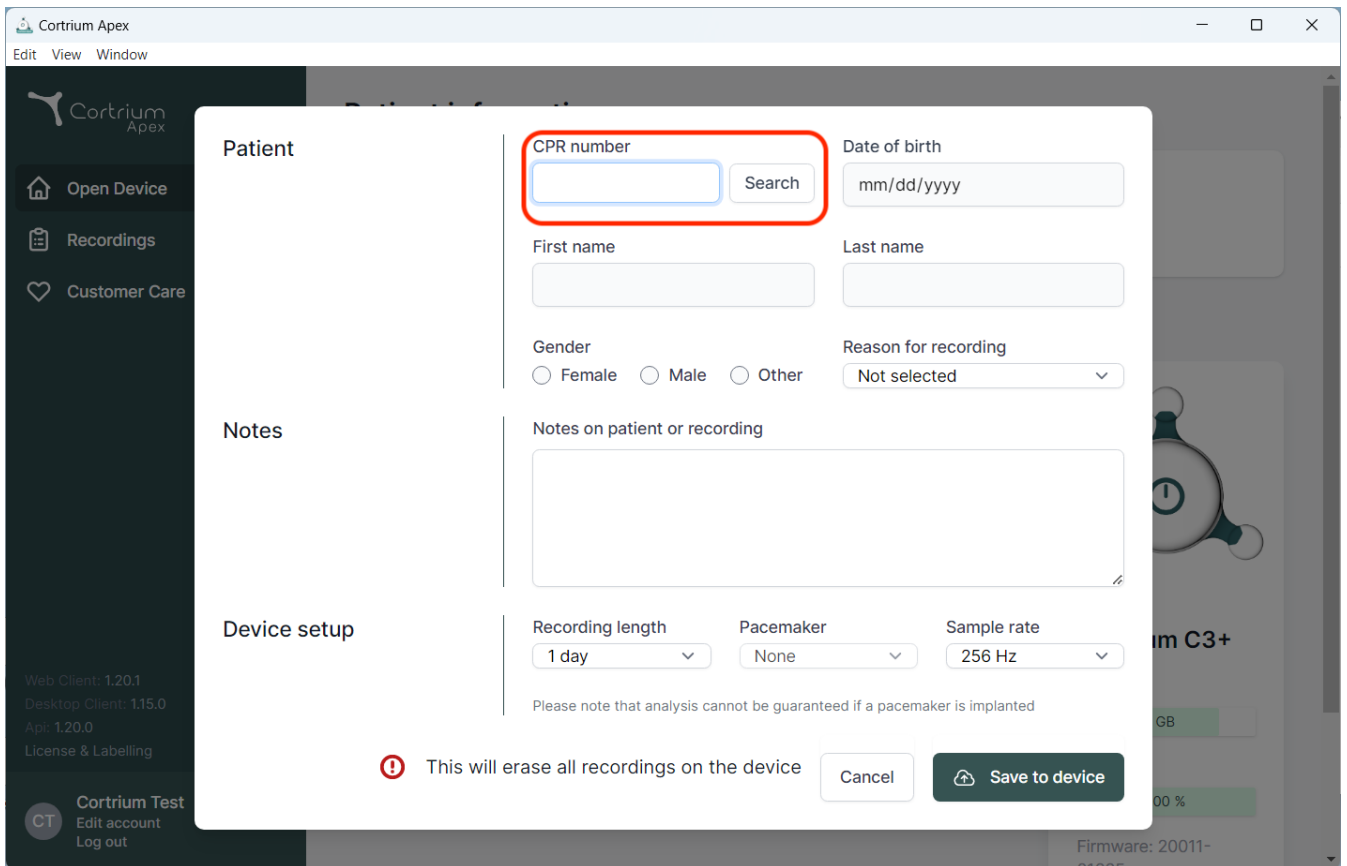


The screenshot shows the Cortrium Apex software interface with a modal window for patient search. The modal is titled "Patient" and contains the following fields and controls:

- CPR number:** A text input field with a blue border, highlighted by a red rectangle. Next to it is a "Search" button.
- Date of birth:** A text input field with the placeholder "mm/dd/yyyy".
- First name:** A text input field.
- Last name:** A text input field.
- Gender:** Three radio buttons labeled "Female", "Male", and "Other".
- Reason for recording:** A dropdown menu with "Not selected" as the current option.
- Notes:** A section titled "Notes" with a sub-label "Notes on patient or recording" and a large text area for notes.
- Device setup:** A section with three dropdown menus: "Recording length" (set to "1 day"), "Pacemaker" (set to "None"), and "Sample rate" (set to "256 Hz").

Below the device setup section, there is a warning message: "Please note that analysis cannot be guaranteed if a pacemaker is implanted". At the bottom of the modal, there is a red warning icon and the text "This will erase all recordings on the device", followed by "Cancel" and "Save to device" buttons.

## v. Rol voor alleen uploaden

- Zodra deze functie is ingeschakeld voor een gebruiker, kan de gebruiker alleen gegevens uploaden en rapporten bestellen zonder toegang te hebben tot patiëntinformatie of rapporten.

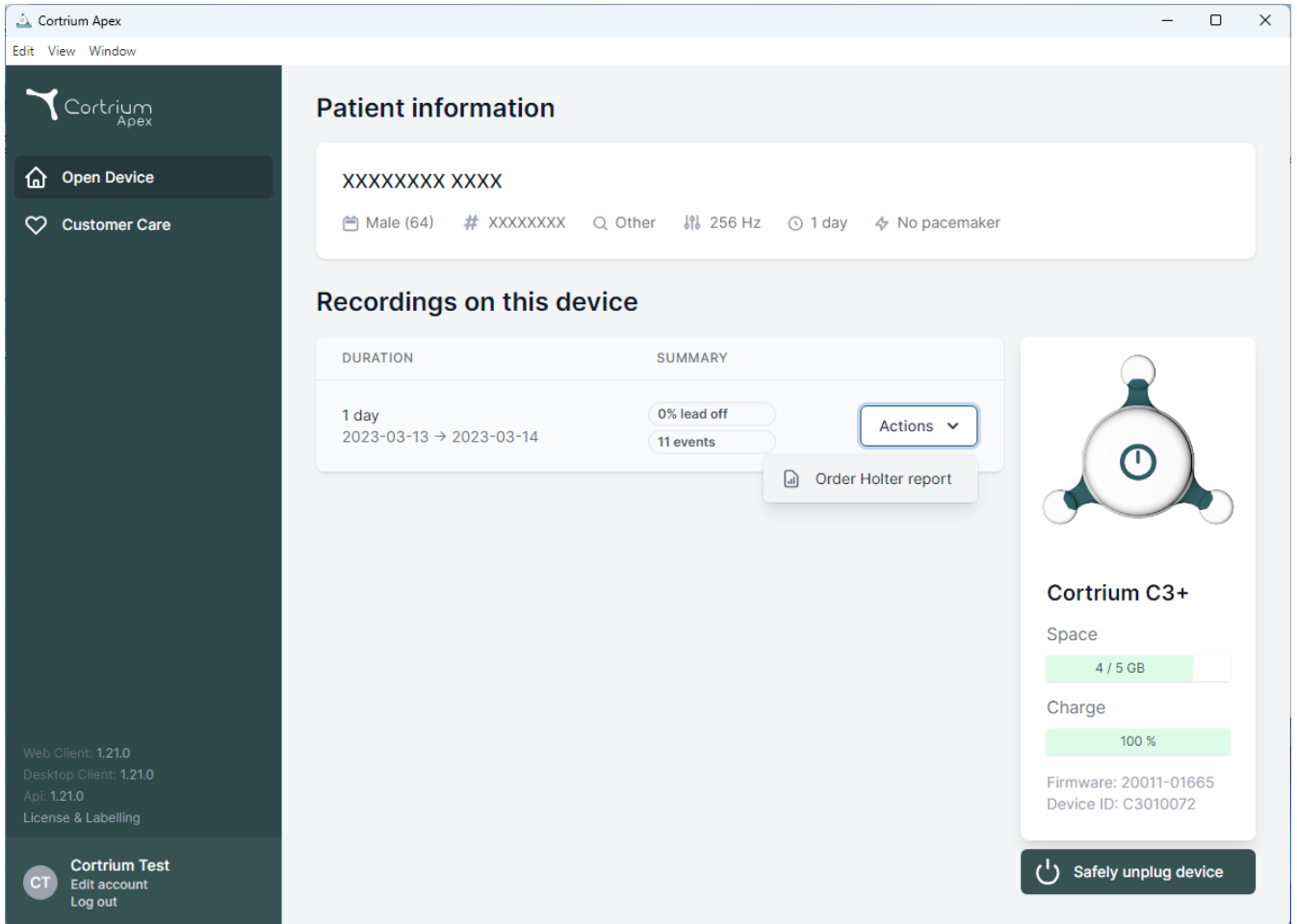

The screenshot displays the Cortrium Apex web application interface. The left sidebar contains navigation links: 'Open Device' and 'Customer Care'. The main content area is divided into two sections: 'Patient information' and 'Recordings on this device'.

**Patient information**

XXXXXXX XXXX

Male (64) # XXXXXXXX Other 256 Hz 1 day No pacemaker

**Recordings on this device**

| DURATION                         | SUMMARY                  |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1 day<br>2023-03-13 → 2023-03-14 | 0% lead off<br>11 events |

Actions

Order Holter report

**Cortrium C3+**

Space  
4 / 5 GB

Charge  
100 %

Firmware: 20011-01665  
Device ID: C3010072


Safely unplug device

Web Client: 1.21.0  
Desktop Client: 1.21.0  
Api: 1.21.0  
License & Labelling

Cortrium Test  
Edit account  
Log out


## vi. Active Directory-integratie

- Zodra dit is ingeschakeld voor een organisatie, wordt er een aangepaste single sign-on inlogschermbeweergegeven voor die organisatie. Hieronder is het inlogschermban Cortrium; de werkelijke inlogprompt kan er anders uitzien

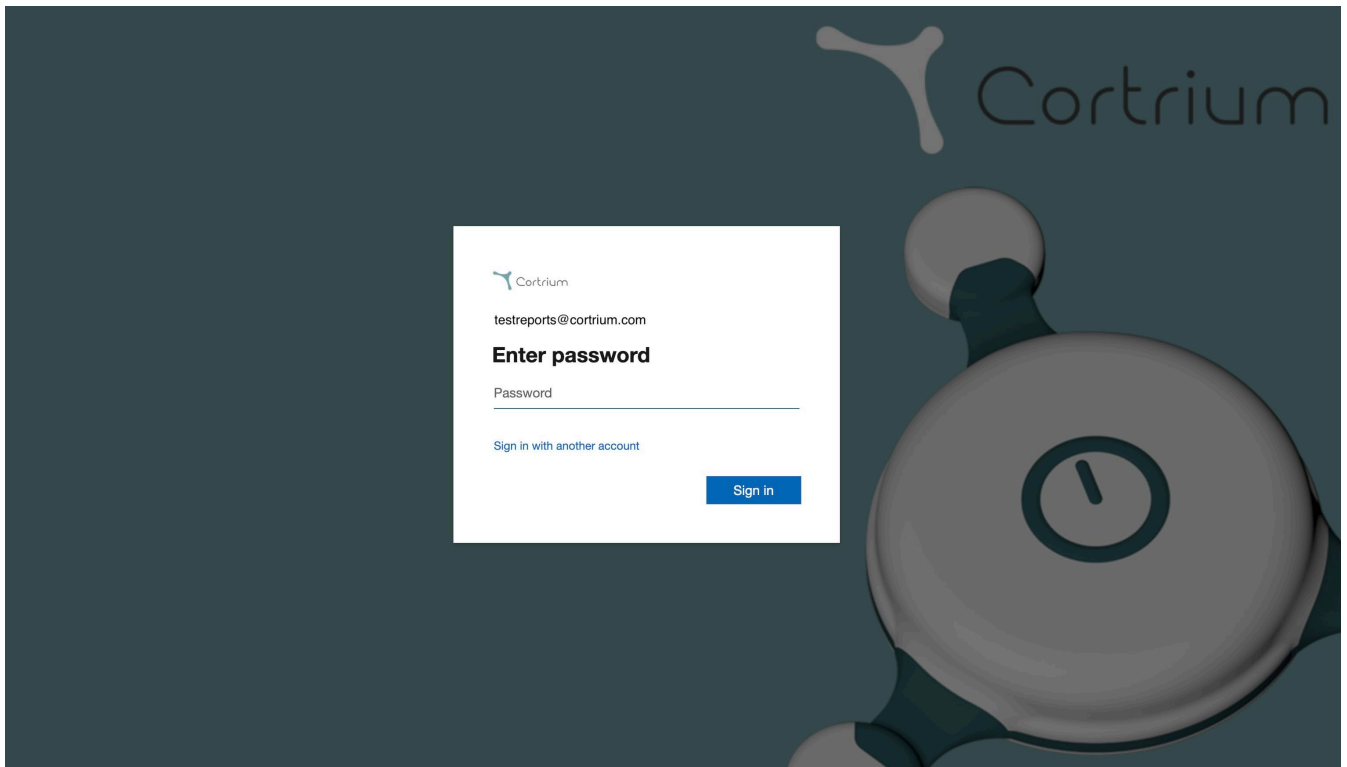

## vii. Verwijzing van patiënten

- Als doorverwijzingsintegratie actief is, wordt de optie om een doorverwijzings-PDF-bestand te uploaden weergegeven.
- Klik op Bestand selecteren en kies de juiste PDF met patiëntverwijzingen van uw computer.
- De PDF van de verwijzing wordt bij het uploaden automatisch aan de patiëntregistratie toegevoegd.

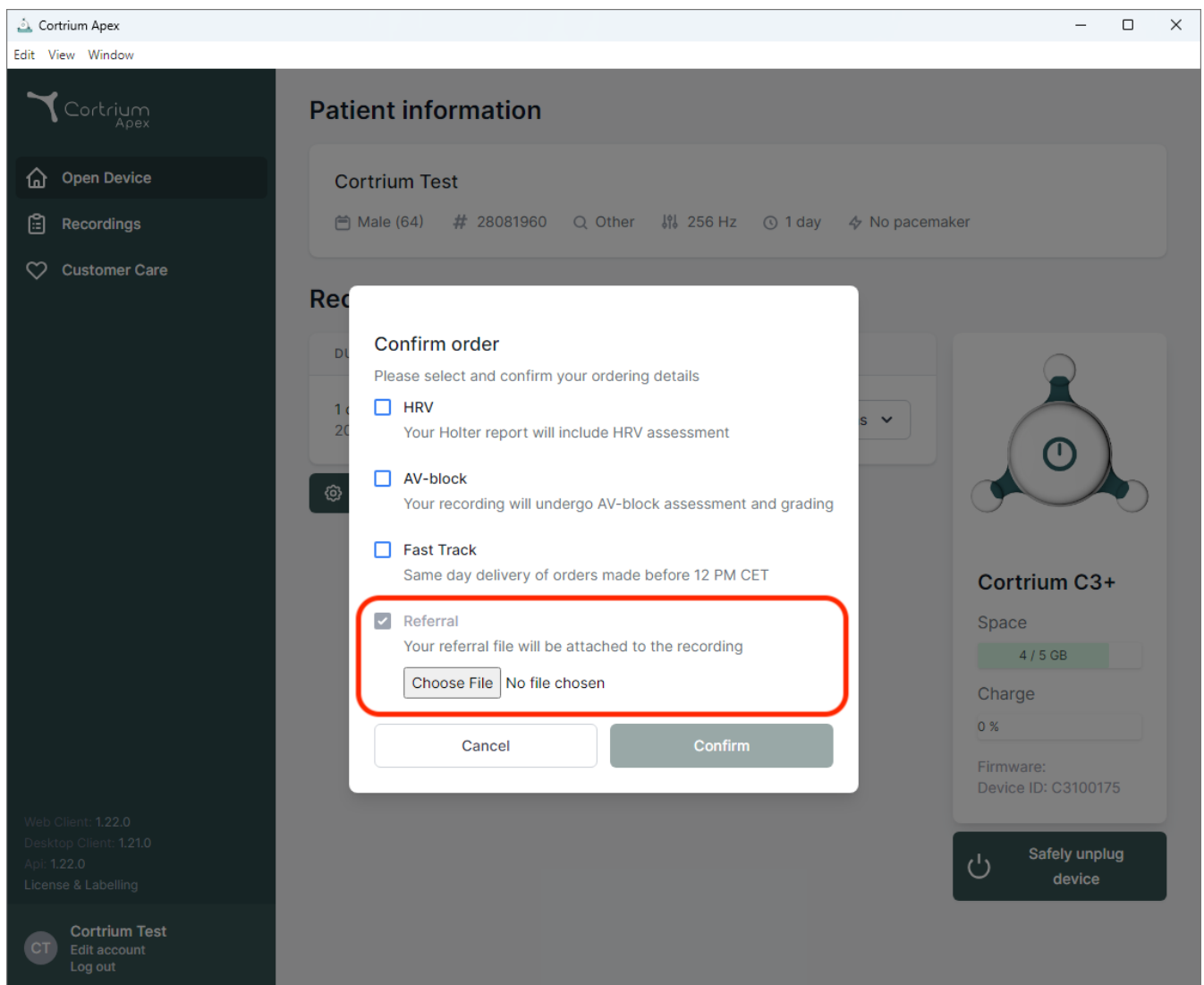

- Als doorverwijzingsintegratie actief is en er een opname is besteld, is de verwijzing toegankelijk onder opnamedetails.



[Open Device](#)

[Recordings](#)

[Customer Care](#)

Web Client: 1.22.0

Desktop Client: 1.21.0

Api: 1.22.0

License & Labelling

CT

**Cortrium Test**  
Edit account  
Log out

Recording details

Delete recording

Test Patient

Male

1950-10-01 (74)

# 12345678

Afib screening

Edit

Uploaded By

Test User 03

Distributor 01 > Approver Organisation > Test Clinic

2025-02-12 10:41

2025-02-12 10:41

Referral

Recording Summary

32 minutes

0 events

No pacemaker

0.0% lead off

2020-01-16 11:31

256 Hz

C3020195

View recording

View >

Convert to Cardioline format

Convert >


Holter Reports

Order Holter report

Ordered: 2025-02-12 10:41



- Een blauwe stip op een opname in de weergave "Opnames" geeft aan dat een bijgevoegde verwijzing nog niet is gedownload of bekeken voor het specifieke rapport.

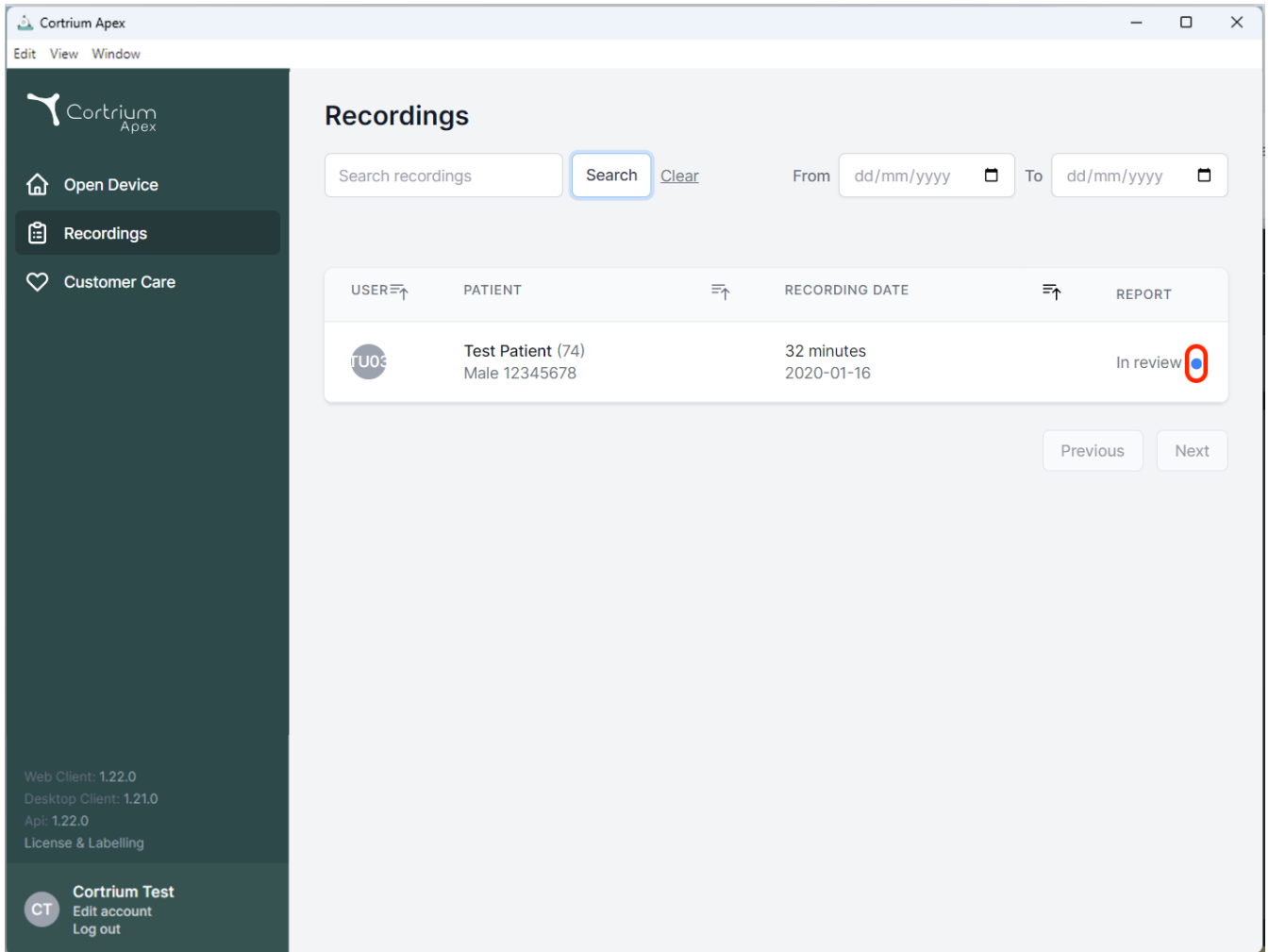

Cortrium Apex

Edit View Window

Cortrium Apex

Open Device

Recordings

Customer Care

Web Client: 1.22.0  
Desktop Client: 1.21.0  
Api: 1.22.0  
License & Labelling

CT Cortrium Test  
Edit account  
Log out

## Recordings

Search recordings  [Clear](#)


From dd/mm/yyyy To dd/mm/yyyy

| USER | PATIENT                            | RECORDING DATE           | REPORT                                                                                        |
|------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| TU03 | Test Patient (74)<br>Male 12345678 | 32 minutes<br>2020-01-16 | In review  |

Previous Next

### viii. Goedkeuringsstroom voor rapporten

- Als goedkeuringsintegratie actief is en een opname is besteld, zal het rapport na analyse beschikbaar zijn voor een lid van de organisatie met goedkeuringsrechten.
- Rapporten die wachten op goedkeuring kunnen worden bekeken door "Wacht op goedkeuring" te selecteren.
- Als doorverwijzingsintegratie actief is, geeft een blauw stipje op een opname in de weergave Opnames aan dat een gekoppelde doorverwijzing voor het betreffende rapport nog niet is gedownload of bekeken.

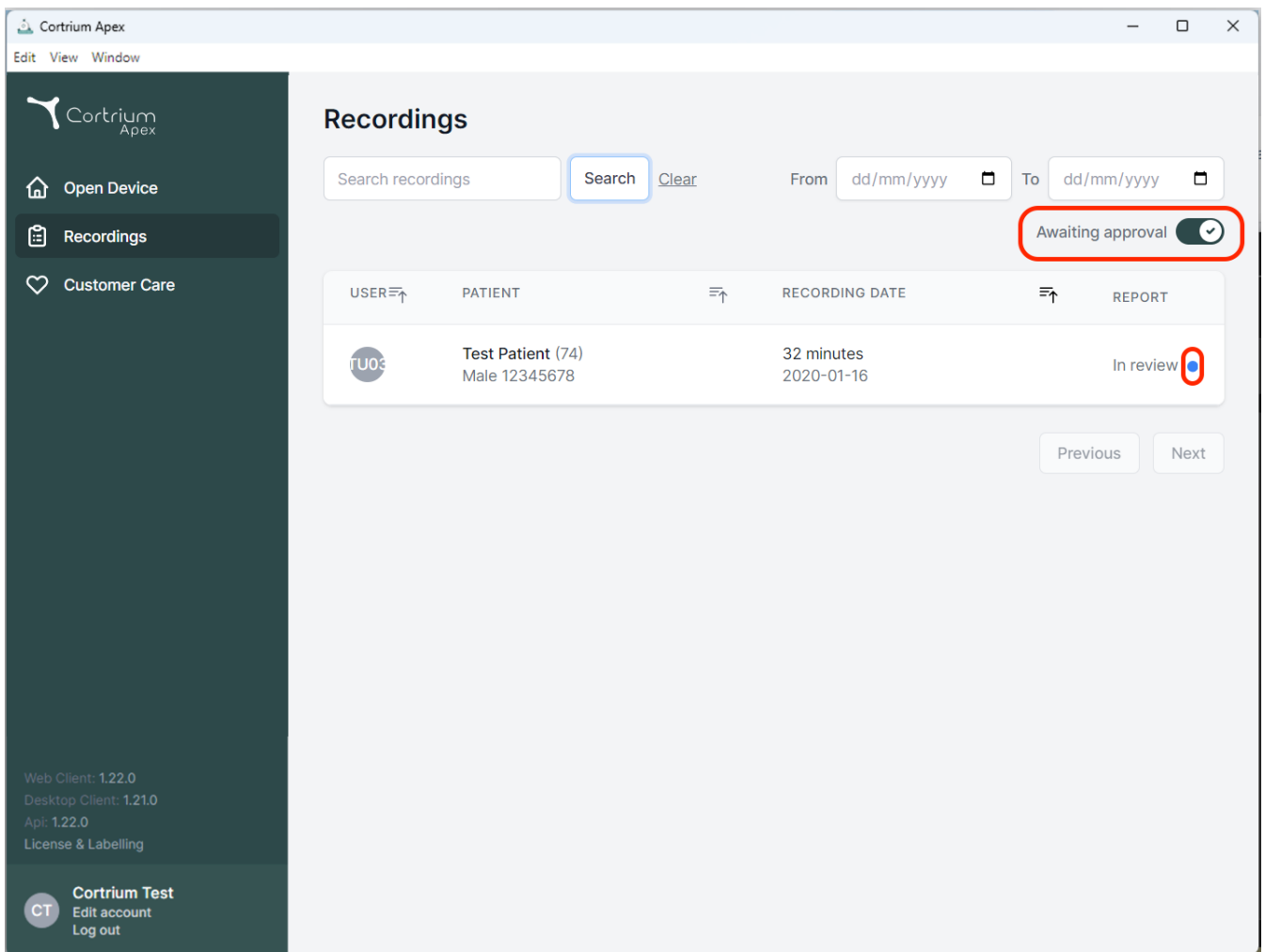

**Recordings**

Search recordings   From dd/mm/yyyy To dd/mm/yyyy

Awaiting approval ☒


| USER | PATIENT                            | RECORDING DATE           | REPORT                                                                                          |
|------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TU03 | Test Patient (74)<br>Male 12345678 | 32 minutes<br>2020-01-16 | In review  |

Previous Next

Web Client: 1.22.0  
Desktop Client: 1.21.0  
Api: 1.22.0  
License & Labelling

**Cortrium Test**  
Edit account  
Log out

- Rapporten die moeten worden beoordeeld, kunnen worden geopend en beoordeeld door een lid van de organisatie met goedkeuringsrechten door naar de details van de opname te gaan en "Rapport beoordelen" te selecteren.

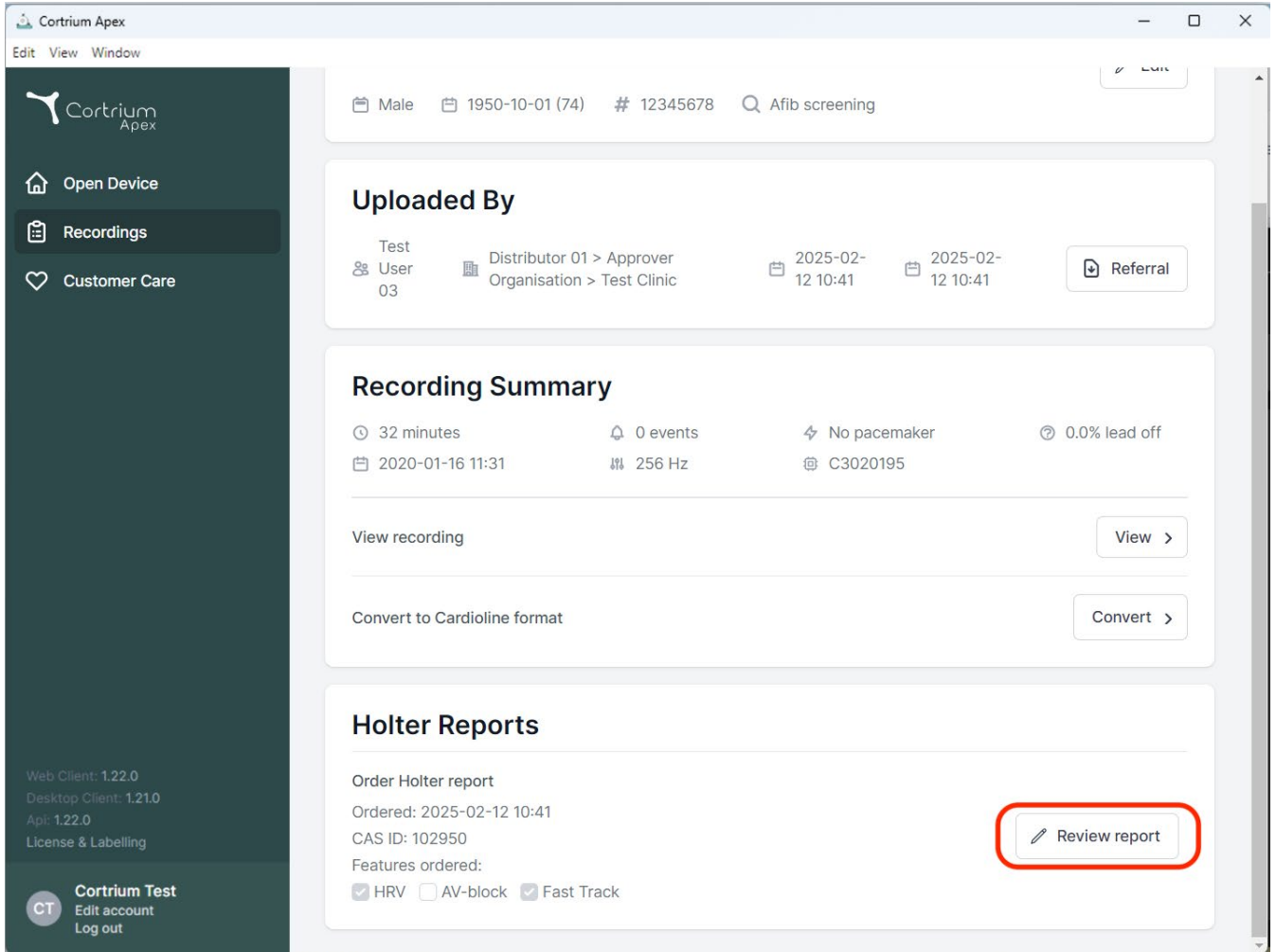

The screenshot displays the Cortrium Apex web application interface. The top navigation bar includes 'Edit', 'View', and 'Window' options. The left sidebar contains navigation links: 'Open Device', 'Recordings' (highlighted), and 'Customer Care'. The main content area shows patient details: Male, 1950-10-01 (74), # 12345678, and Afib screening. Below this, the 'Uploaded By' section shows 'Test User 03' and 'Distributor 01 > Approver Organisation > Test Clinic' with upload dates of 2025-02-12 10:41. A 'Referral' button is present. The 'Recording Summary' section provides details: 32 minutes, 0 events, No pacemaker, 0.0% lead off, and a recording date of 2020-01-16 11:31. It includes a 'View recording' button and a 'Convert to Cardioline format' button. The 'Holter Reports' section shows 'Order Holter report' with an order date of 2025-02-12 10:41, CAS ID: 102950, and features ordered: HRV, AV-block, and Fast Track. A 'Review report' button is highlighted with a red rectangle.

**Uploaded By**

Test User 03    Distributor 01 > Approver Organisation > Test Clinic    2025-02-12 10:41    2025-02-12 10:41    [Referral](#)

**Recording Summary**

32 minutes    0 events    No pacemaker    0.0% lead off  
 2020-01-16 11:31    256 Hz    C3020195

[View recording](#)    [View >](#)

[Convert to Cardioline format](#)    [Convert >](#)

**Holter Reports**


Order Holter report  
 Ordered: 2025-02-12 10:41  
 CAS ID: 102950  
 Features ordered:  
☒ HRV    ☐ AV-block    ☒ Fast Track

[Review report](#)

Web Client: 1.22.0  
 Desktop Client: 1.21.0  
 Api: 1.22.0  
 License & Labelling

**Cortrium Test**  
 Edit account  
 Log out

- De goedkeurder heeft de mogelijkheid om het rapport en de bevindingen te bekijken en toe te voegen aan de samenvatting van het rapport.
- Wanneer de samenvatting van het rapport wordt weergegeven, wordt informatie over de goedkeurder toegevoegd aan de samenvatting, samen met de optie om ondersteunende notities voor het rapport toe te voegen.
- Als het rapport is bekeken, kan het worden goedgekeurd door op "Rapport goedkeuren" te klikken.
- Als het rapport is goedgekeurd, wordt het afgeleverd bij de aanvrager.
- Als een rapport niet kan worden goedgekeurd, neem dan contact op met de klantenservice van Cortrium met de CAS ID (vermeld onder Holterrapport bij de opnamedetails).

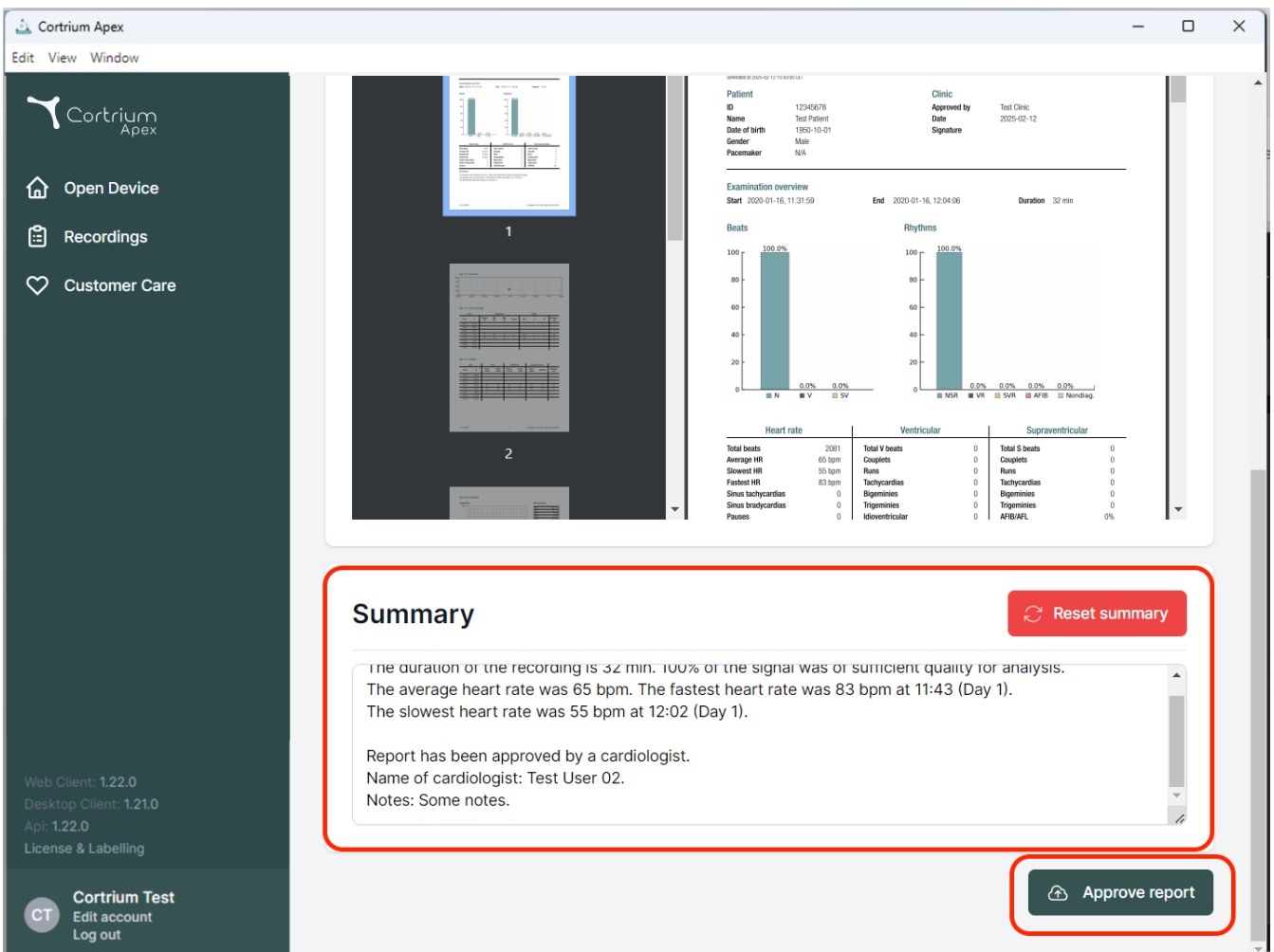

**Cortrium Apex**

Edit View Window

**Open Device**  
**Recordings**  
**Customer Care**

Web Client: 1.22.0  
Desktop Client: 1.21.0  
Apl: 1.22.0  
License & Labelling

**Cortrium Test**  
Edit account  
Log out

**Patient**  
ID: 12345678  
Name: Test Patient  
Date of birth: 1980-10-01  
Gender: Male  
Pacemaker: N/A

**Clinic**  
Approved by: Test Clinic  
Date: 2025-02-12  
Signature:

**Examination overview**  
Start: 2020-01-16, 11:31:59  
End: 2020-01-16, 12:04:06  
Duration: 32 min

**Beats**  
100.0%  
0.0%  
0.0%

**Rhythms**  
100.0%  
0.0%  
0.0%  
0.0%  
0.0%

| Heart rate         |        | Ventricular     |   | Supraventricular |    |
|--------------------|--------|-----------------|---|------------------|----|
| Total beats        | 2031   | Total V beats   | 0 | Total S beats    | 0  |
| Average HR         | 65 bpm | Couplets        | 0 | Couplets         | 0  |
| Slowest HR         | 55 bpm | Runs            | 0 | Runs             | 0  |
| Fastest HR         | 83 bpm | Tachycardias    | 0 | Tachycardias     | 0  |
| Sinus tachycardias | 0      | Bigemines       | 0 | Bigemines        | 0  |
| Sinus bradycardias | 0      | Trigemines      | 0 | Trigemines       | 0  |
| Pauses             | 0      | Idioventricular | 0 | AF/IB/AFI        | 0% |

**Summary** [Reset summary](#)


The duration of the recording is 32 min. 100% of the signal was of sufficient quality for analysis.  
The average heart rate was 65 bpm. The fastest heart rate was 83 bpm at 11:43 (Day 1).  
The slowest heart rate was 55 bpm at 12:02 (Day 1).

Report has been approved by a cardiologist.  
Name of cardiologist: Test User 02.  
Notes: Some notes.

[Approve report](#)

## ix. Nereida-patiëntopzoeking en -rapportage

- Als Nereida-patiëntopzoeking is ingeschakeld, wordt bij het invoeren van het kaartnummer een patiënt opgezocht en worden de patiëntgegevens automatisch ingevuld in de instellingen van het Apex-apparaat.
- Als de automatische levering van rapporten door Nereida is geactiveerd, kunnen voltooide rapporten automatisch worden opgehaald.

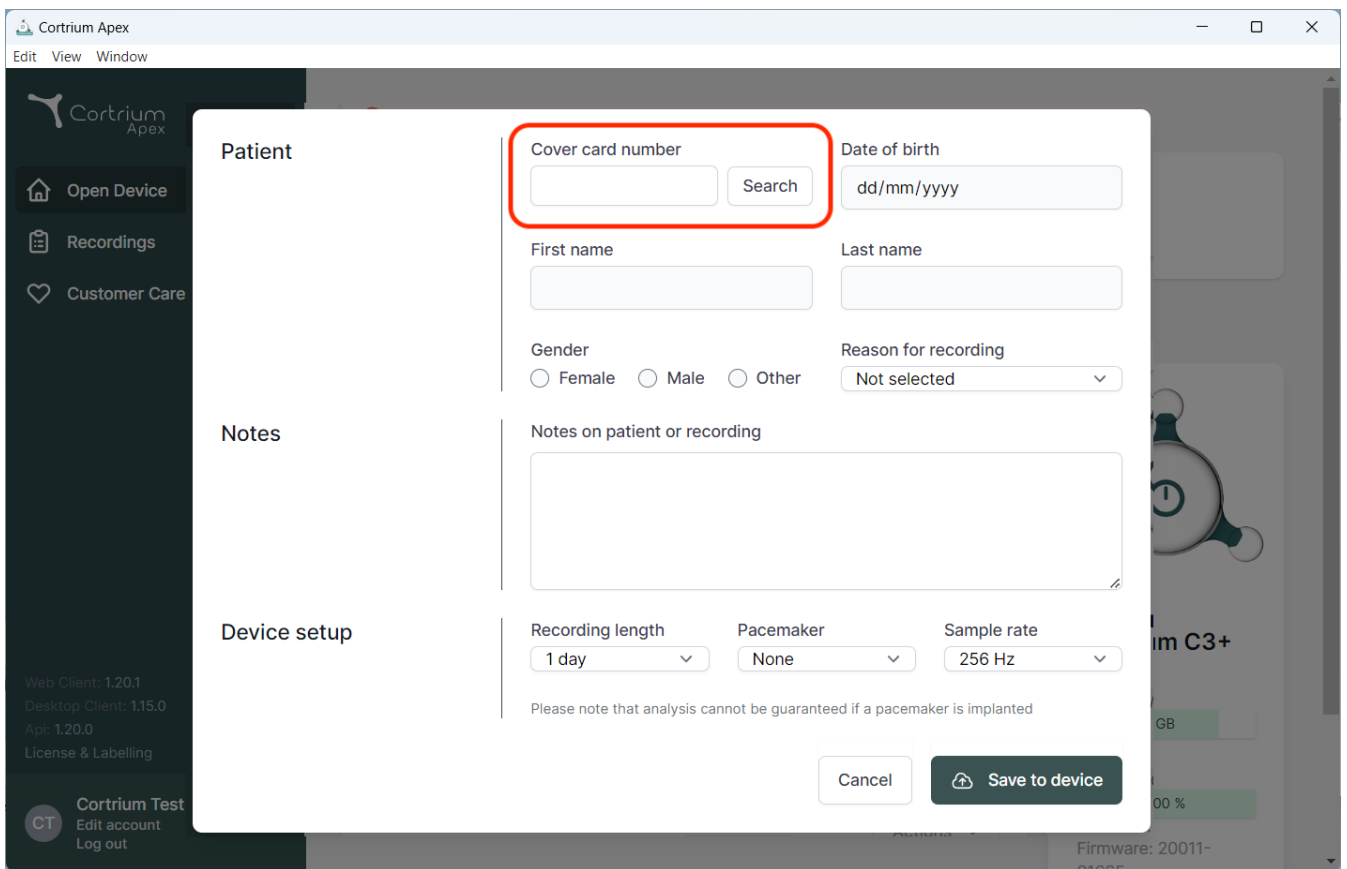

The screenshot shows the Cortrium Apex web application interface. A modal window is open for patient search and recording setup. The modal is divided into three main sections: Patient, Notes, and Device setup.

**Patient Section:**

- Cover card number:** A text input field with a "Search" button next to it. This section is highlighted with a red rectangle.
- Date of birth:** A text input field with a placeholder "dd/mm/yyyy".
- First name:** A text input field.
- Last name:** A text input field.
- Gender:** Radio buttons for "Female", "Male", and "Other".
- Reason for recording:** A dropdown menu with "Not selected" as the current option.

**Notes Section:**

- Notes on patient or recording:** A large text area for entering notes.

**Device setup Section:**

- Recording length:** A dropdown menu with "1 day" selected.
- Pacemaker:** A dropdown menu with "None" selected.
- Sample rate:** A dropdown menu with "256 Hz" selected.

Below the device setup options, there is a note: "Please note that analysis cannot be guaranteed if a pacemaker is implanted".

At the bottom right of the modal, there are two buttons: "Cancel" and "Save to device".

The background of the application shows a sidebar with navigation options: "Open Device", "Recordings", and "Customer Care". The bottom of the sidebar contains version information: "Web Client: 1.20.1", "Desktop Client: 1.15.0", "Api: 1.20.0", and "License & Labelling". The bottom right of the sidebar shows a user profile for "Cortrium Test" with options to "Edit account" and "Log out".



02/2025



Cortrium ApS • Erik Husfeldts Vej 7 • DK-2630 Taastrup • Denemarken  
Email: [info@cortrium.com](mailto:info@cortrium.com) • Website: [www.cortrium.com](http://www.cortrium.com)

**Cortrium Apex** UDI(01)05745000379033

**CE**  
**0123**  
46 / 46